


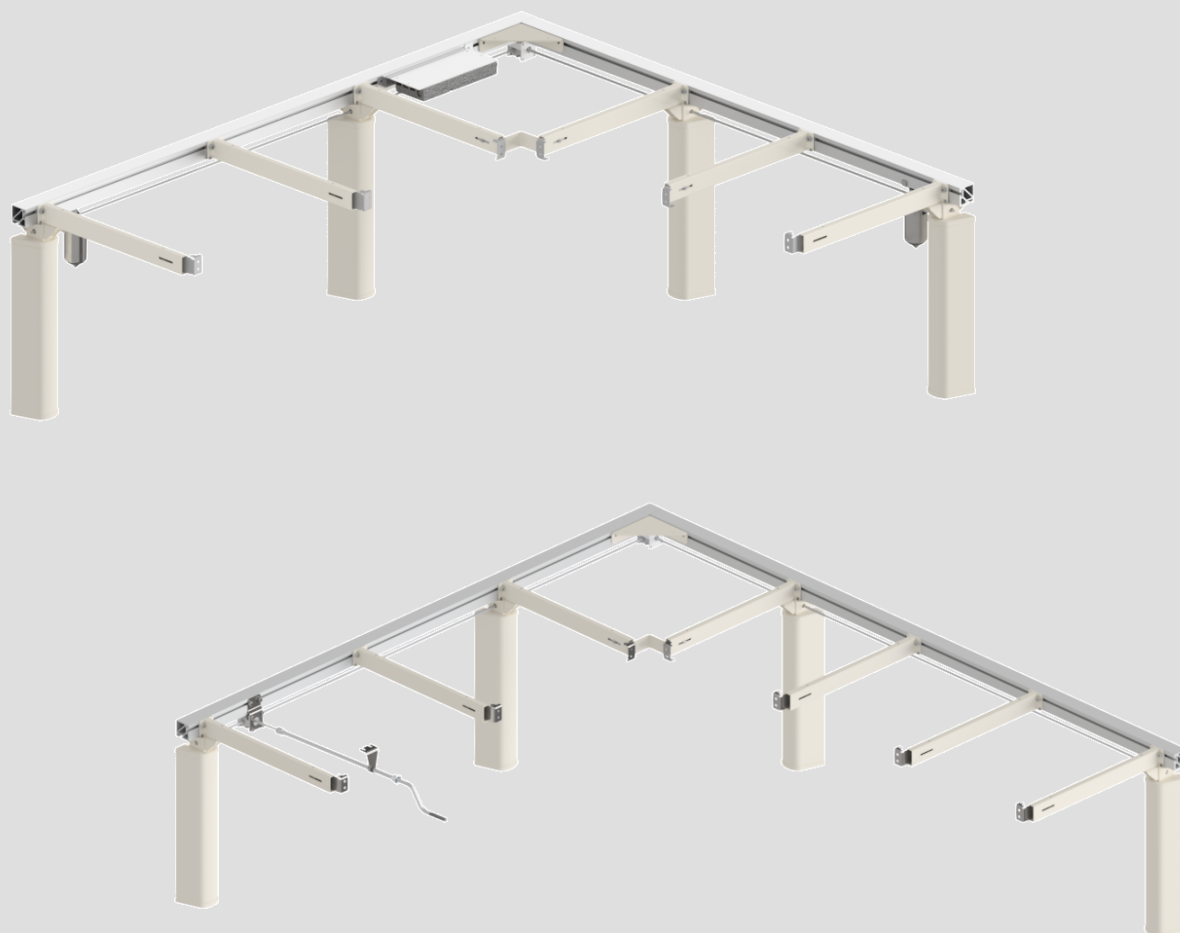

Flexi electric & manual Hörn


Monteringsanvisning, tillägg till Flexi bruksanvisning

1. Inledning


Planering, installation och normal användning får endast utföras om Flexi Manual används i kombination med denna monteringsanvisning.

All övrig information, inklusive användning och tekniska data, finns i Flexi Manual.

Tillverkare:	Ropox A/S, DK-4700 Næstved, Tfn.: +45 55 75 05 00 E-post: info@ropox.dk , www.ropox.dk
---------------------	--

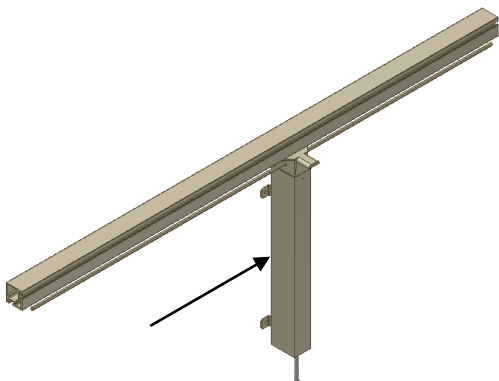


- Skjut på det första benet på en av aluminiumprofilerna och för in sexkantsaxeln genom hålet i benet. Dra åt skruvarna lätt.

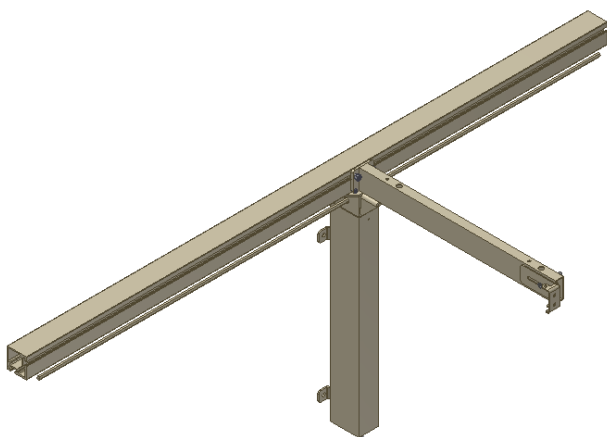

- Skjut in fästet i aluminiumprofilen. MÅSTE placeras över benet. Dra åt skruvarna lätt.

Electric

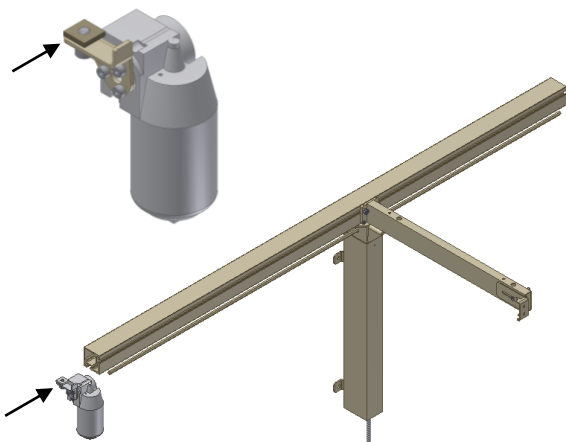

- Skjut in motorfixturens mutter i aluminiumprofilen på undersidan och för sexkantsaxeln genom motorn. Dra åt skruvarna lätt.

Electric




- Placera motorn bredvid benet och dra åt skruven lätt.

Manual




- Skjut in muttern på handvevens beslag i aluminiumprofilen på framsidan och för in sexkantsaxeln genom växelhuset. Dra åt skruvarna lätt.

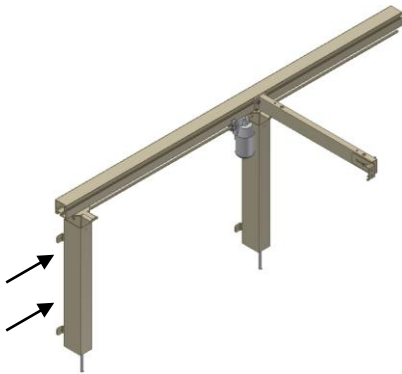


- Skjut in nästa ben i aluminiumprofilen. Dra åt skruvarna lätt.




- Placera nästa fäste över det andra benet. Om extra fästen behövs mellan de två fästen som visas här, måste de monteras först. Dra åt skruvarna lätt.

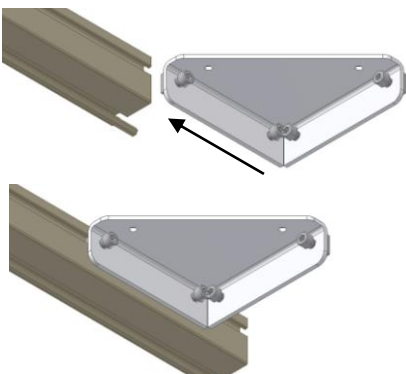


- Skjut in vinkelbeslagets två muttrar i aluminiumprofilen!!! Dra åt skruvarna lätt!

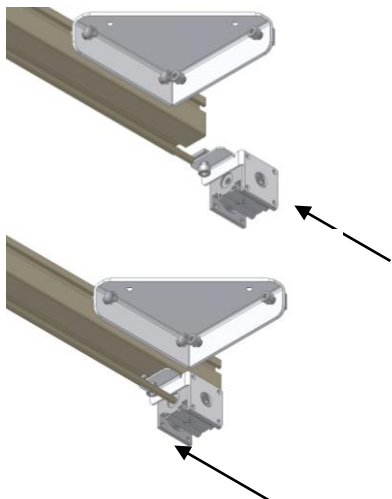

- Skjut in vinkelväxelhuse's mutter i aluminiumprofilen. Viktigt!!! Se till att växeln placeras enligt bilden!!! Placera sexkantsaxeln i växelhuset. Dra åt skruvarna lätt.

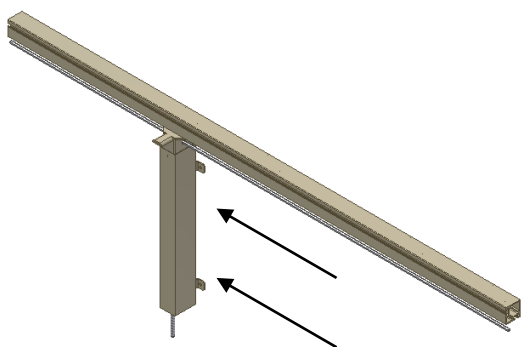


- Montera nu den andra sidan enligt samma procedur. Dra inte åt skruvarna förrän hela ramen har monterats. Placera benet.

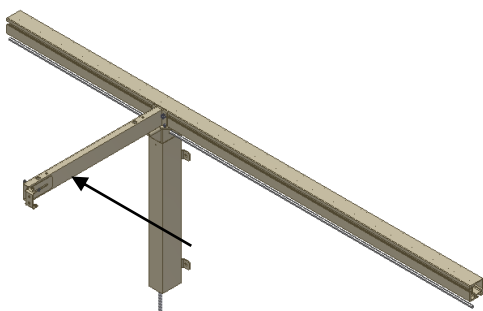


- Placera konsolen.


Electric

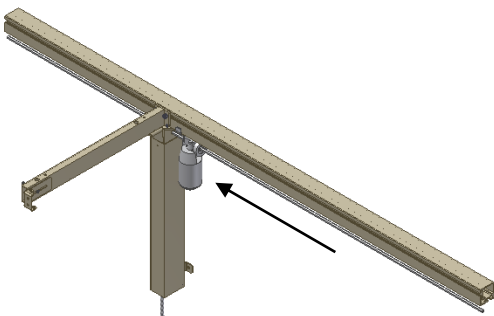


- Placera motorn.

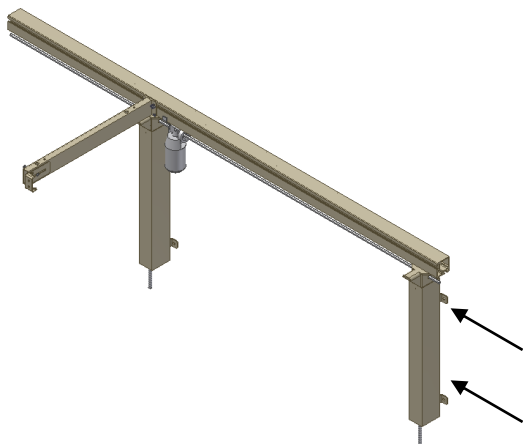


- Placera benet.

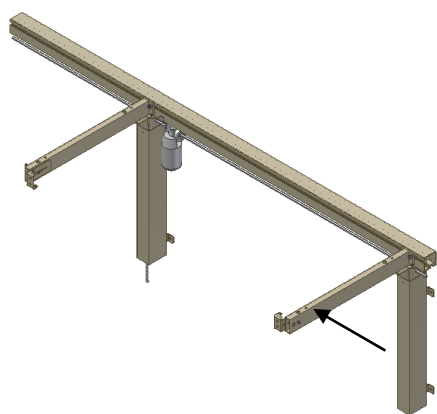


- Placera det yttersta fästet.

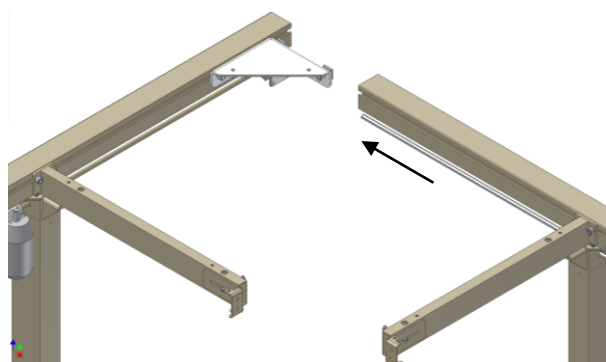


- Montera nu de två ramarna i vinkelbeslaget.
Kontrollera att båda sexkantsaxlarna har tryckts in i växelhuset.

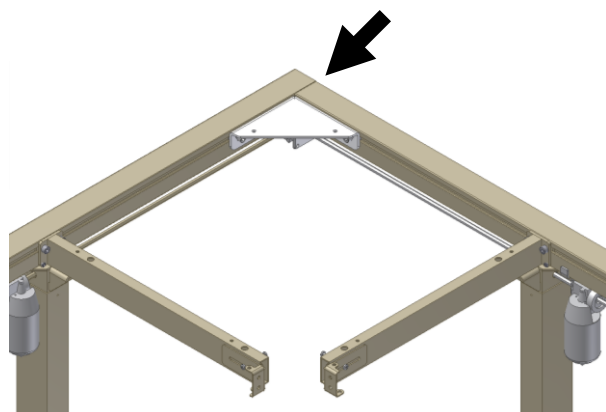


- Placera aluminiumprofilerna så att de ligger i linje med hörnet.

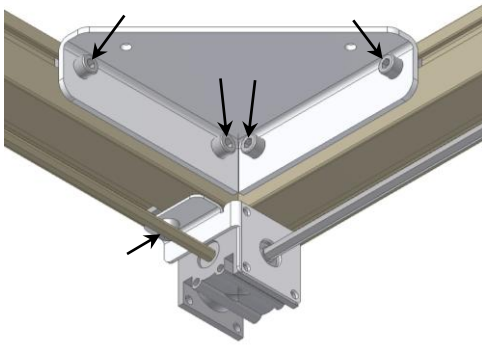


- Dra åt de fyra skruvarna på vinkelbeslaget och en skruv på växelhusbeslaget.

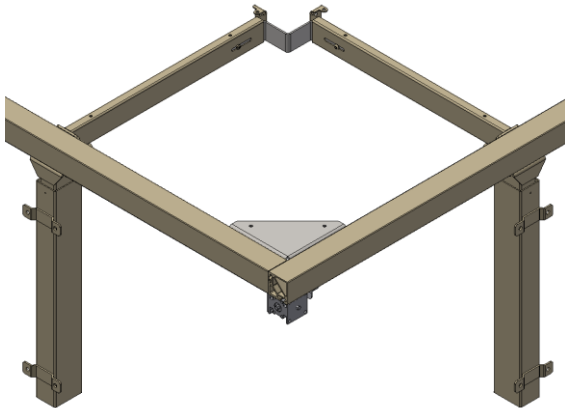

- Montera monteringsbeslaget på de två fästena i ramens hörn. Flytta benen från sida till sida tills fästena passar in enligt bilden. Dra åt de två skruvarna.
- Standardmått för placering av hörnben visas. Dessa kan justeras upp till +30 mm.

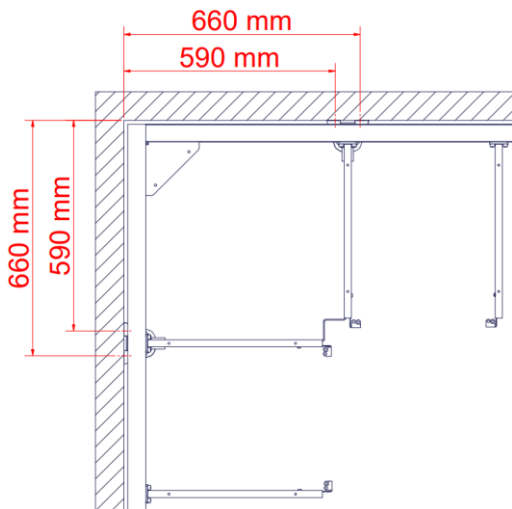


- Dra åt de två skruvarna.

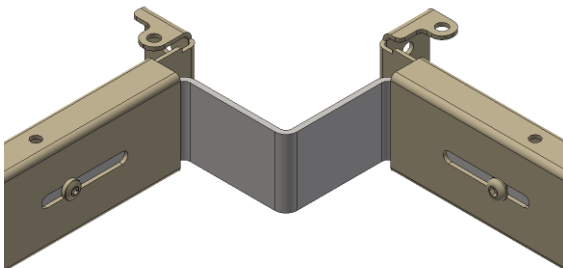



- När alla ben och konsoler har justerats och placerats i önskad position, dra åt alla skruvar!

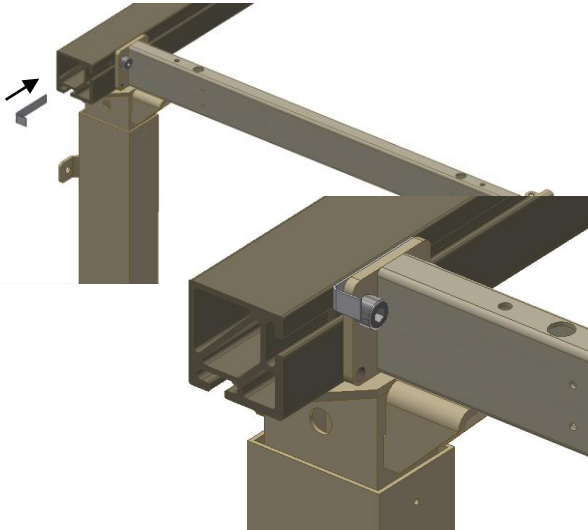

- Om stödarmen inte sitter rakt utan pekar uppåt, kan detta åtgärdas genom att montera en vinkel mellan stödarmen och aluminiumprofilen!

Följ instruktionerna i FlexiElectrics bruksanvisning före användning!



ROPOX A/S

Ringstedgade 221

DK-4700 Næstved

Tfn.: +45 55 75 05 00

E-post: info@ropox.dk

www.ropox.dk