




Ropox Kurve unit

Montagevejledning

Brugermanual

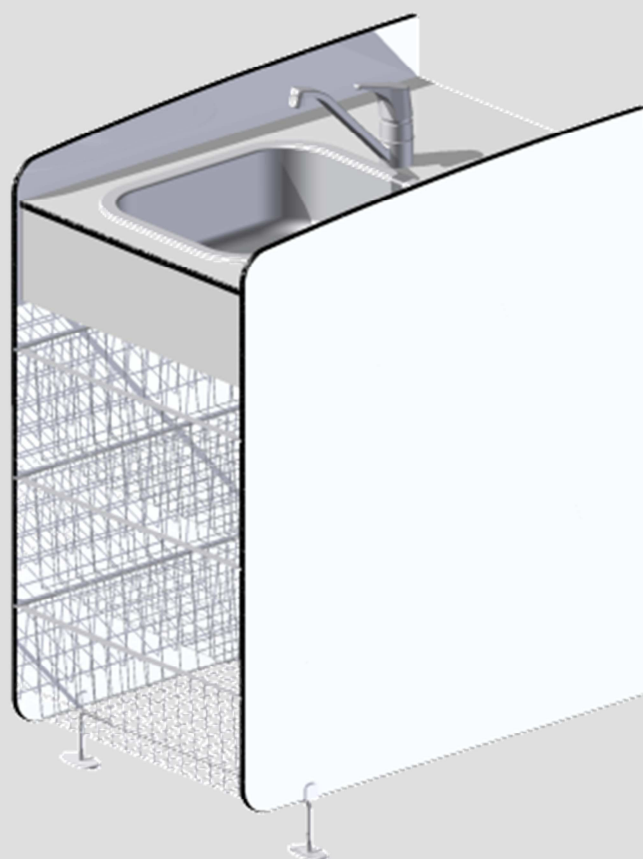

Denne folder skal altid opbevares ved produktet

Indholdsfortegnelse

1. Tekniske data	3
2. Modeller	4
3. Målskitse.....	4
4. Komponentliste	5
5. Montagevejledning.....	7
6. Rengøring/ vedligeholdelse	10
7. CE-erklæring	11
8. Reklamation.....	12

1. Tekniske data

Produktnavn:	Ropox Kurve unit
Varenummer:	50-50696 - Ropox kurve unit med vask, ekskl. Blandingsbatteri, afløbs- og tilslutningsslanger 50-50697 - Ropox kurve unit uden vask
Arbejdshøjde:	95 cm
Materiale:	Stål 37
Bordplade og sideplader	Kompakt laminat
Overfladebehandling:	Pulverlakering
Maks. belastning på stel (statisk):	30 kg jævnt belastet over hele bordpladen
Garanti:	Se afsnittet: Reklamation
Producent:	Ropox A/S, DK-4700 Næstved, Tlf.: +45 55 75 05 00 E-mail: info@ropox.dk , www.ropox.dk

2. Modeller


Med vask



Uden vask




3. Målskitse

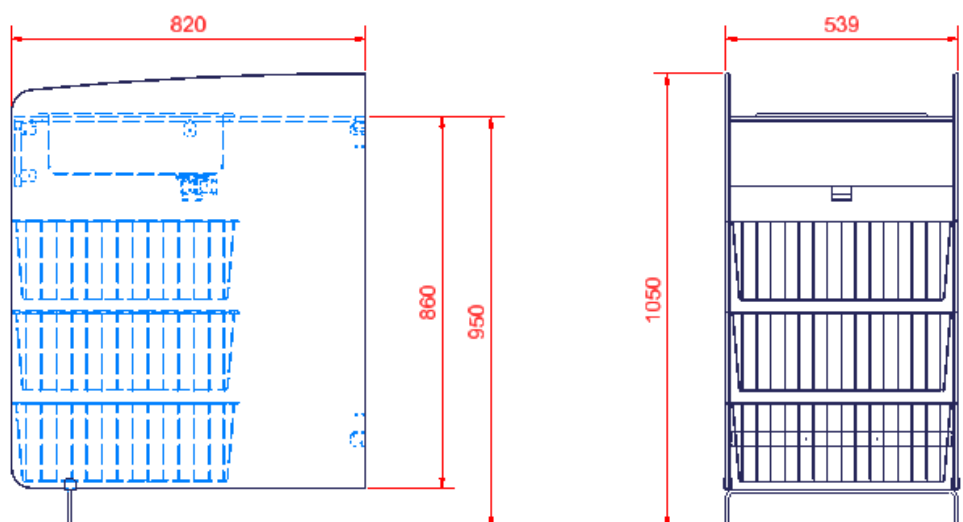

4. Komponentliste


Sideafdækning venstre 1 stk.

Varenummer : 50*50670-211

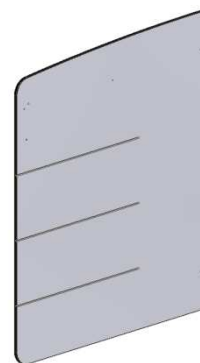

Sideafdækning højre 1 stk.

Varenummer: 50*50670-212

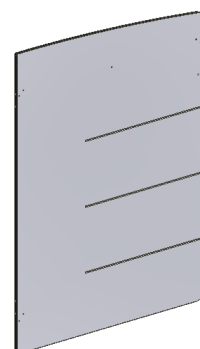

Bordplade 1 stk.

Monteret med beslag

Varenummer:


Bordplade med udskæring til vask: 50*50670-213

Bordplade uden udskæring til vask: 50*50670-225



Frontsarg 50*50670-214 1 stk.

Monteret med beslag

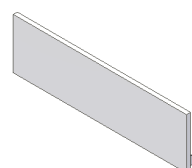

Trådkurve 97002007: 3 stk.



Beslag 50*50670-215: 3 stk.
2 stk. er monteret på bordpladen



Støttefod 50-50670-218: 1 stk.



Vinkelbeslag 50*50670-217 4 stk.
2 stk. monteret på bordplade
2 stk. monteret på frontsarg



Vask 97001342 1 stk.




Vinkel med omløber 97001191 1 stk.




Pladeskrue Ø4,8x9,5 torx 95091009: 20 stk.




5. Montagevejledning

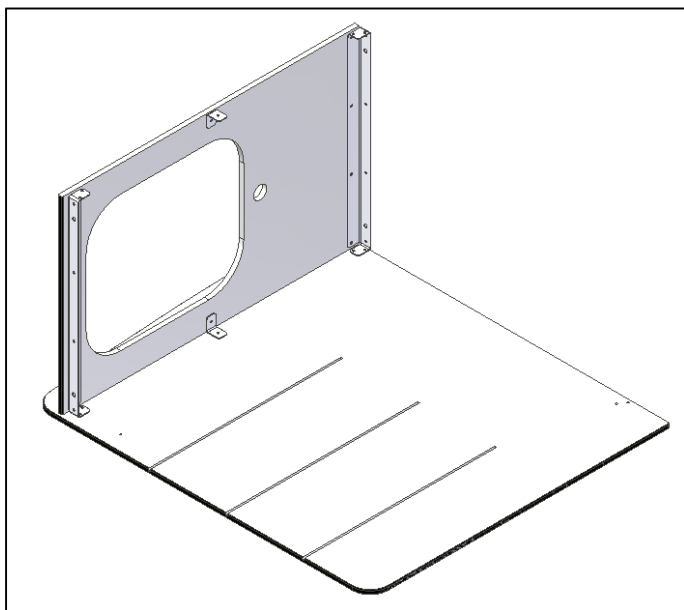


Bordplade skrues på den ene sideplade.

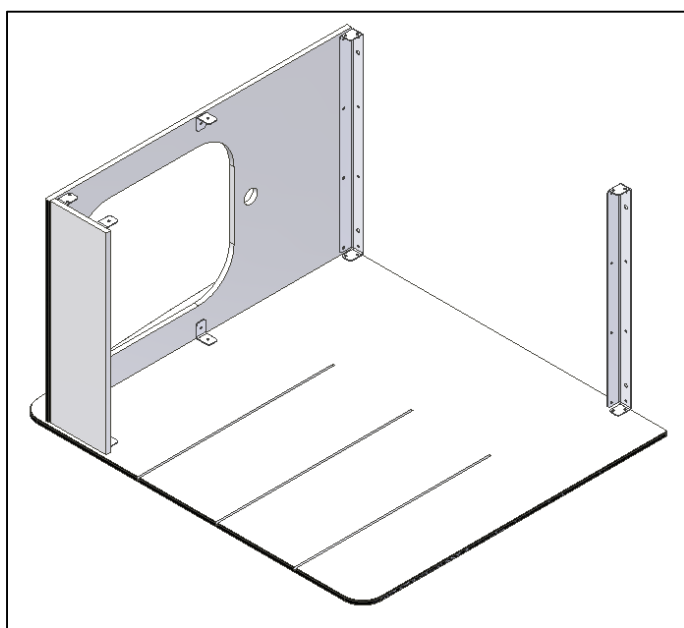


Frontsarg og løst beslag skrues på.

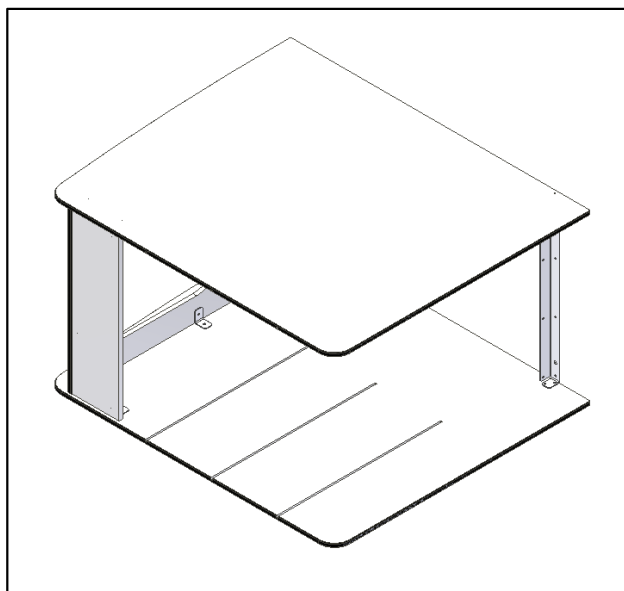

Den modsatte sideplade skrues på.

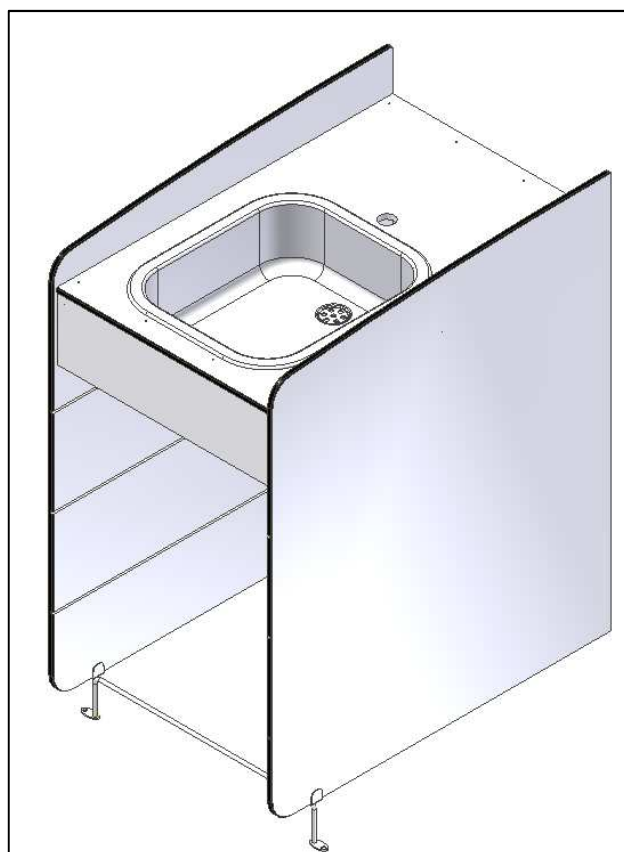

Støttefod, vask og vinkel med omløber monteres.

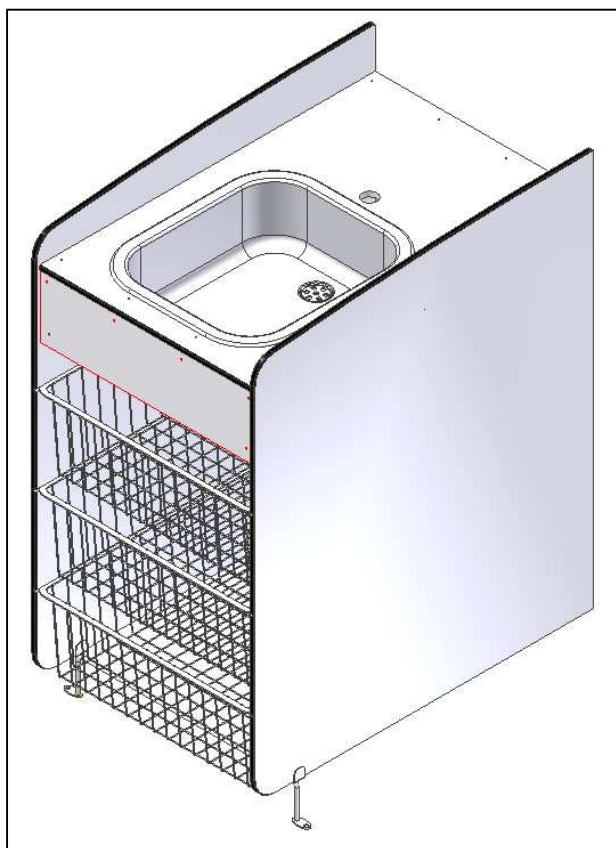

**Kurveenheden skrues fast til væggen og
trådkurvene kan herefter monteres.**

6. Rengøring/ vedligeholdelse

Ropox Kurve unit er vedligeholdelsesfri. Af sikkerhedsmæssige hensyn anbefales det dog jævnligt at checke alle montageskruer for at sikre, at fastspændingen på væggen er i orden og sikker.

Rengøring

Benyt ikke højtryksrenser til rengøring af dette produkt.
Der anvendes blot en blød klud eller svamp med almindeligt maks. 60°C varmt sæbevand (pH 7) eller husholdningssprit.

Vigtigt:

Benyt ikke skurepulver eller andre slibende midler, da de vil ridse overfladerne.
Benyt heller ikke spidse eller skarpe rengøringsredskaber. Stærk syre eller alkaliske produkter må ikke anvendes.

7. CE-erklæring

Kurve unit med vask: 50-50696

Kurve unit uden vask: 50-50697

er i overensstemmelse med følgende direktiver og standarder:

DIREKTIVER

Rådets direktiv 93/42/EØF af 14. juni 1993 om medicinske anordninger

Maskin Direktiv nr. 2006/42/EF, vedrørende Maskiner ændret ved Direktiv nr. 98/37/EF

STANDARDS

DS/EN ISO 12182: 2012

DS/EN ISO 14971: 2001

Dato: 01.05.15




Tommy Jensen
Adm. direktør

8. Reklamation

Se generelle salgs- og leveringsbetingelser på www.ropox.dk



Ringstedgade 221
DK – 4700 Næstved
Tel.: +45 55 75 05 00 Fax.: +45 55 75 05 50
E-mail: info@ropox.dk
www.ropox.dk

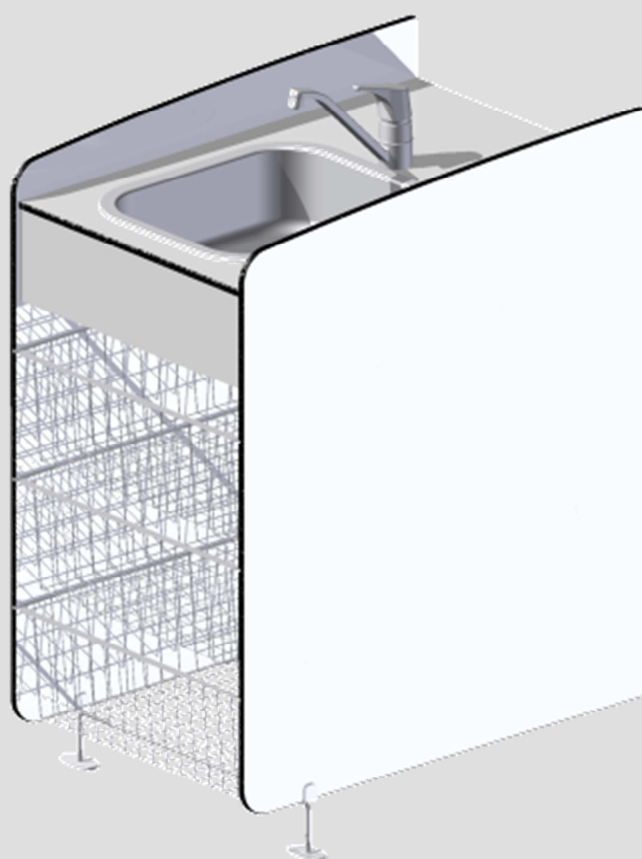

Ropox Basket unit

Mounting Instructions

User Manual



Keep this manual with the product at all times

Contents

1. Technical data.....	15
2. Models	16
3. Dimensions	16
4. List of components	17
5. Mounting instructions	19
6. Cleaning/ maintenance.....	222
7. CE declaration.....	233
8. Complaint	244

1. Technical data

Product name:	Ropox Basket unit
Item numbers:	50-50696 – Ropox Basket unit with wash basin 50-50697 – Ropox Basket unit without wash basin
Working height:	95 cm
Material:	Steel 37
Table top and side covers:	Compact Laminate
Surface treatment:	Powder coating
Max. load on frame (static):	30 kg evenly distributed over the table top
Complaint:	See Complaint
Manufacturer	Ropox A/S, DK-4700 Næstved, Tel.: +45 55 75 05 00 e-mail: info@ropox.dk , www.ropox.dk

2. Models



With wash basin



Without wash basin



3. Dimensions

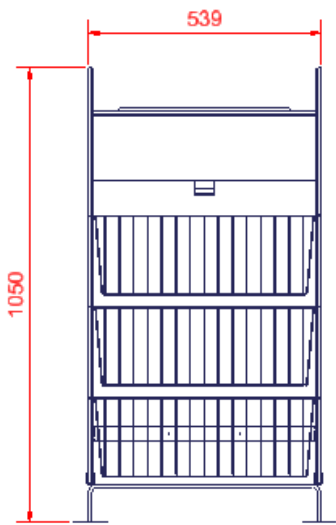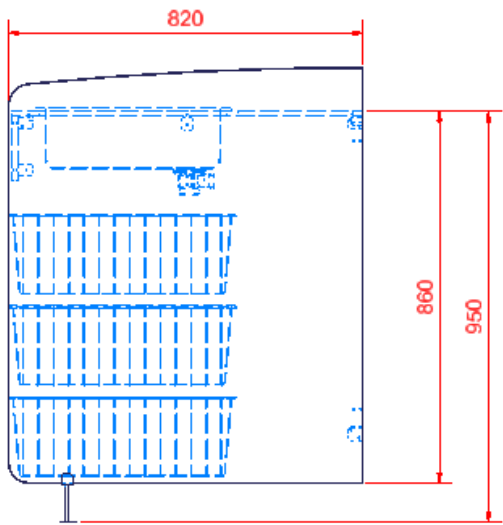

4. List of components


Side cover left 1 pc.

Item number: 50*50670-211



Side cover right 1 pc.

Item number: 50*50670-212

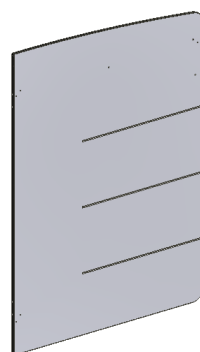

Tabletop 1 pc.

Provided with brackets

Item number:

Tabletop with cutout for wash basin: 50*50670-213




Tabletop without cutout for wash basin: 50*50670-225



Front fascia 50*50670-214 1 pc.

Provided with brackets

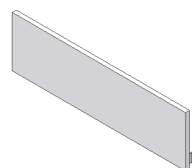

Wire baskets 3 pcs.



Bracket 50*50670-215: 3 pcs.
2 pcs. is mounted on the tabletop



Supporting foot 50*50670-218: 1 pc.



Bracket 50*50670-217 4 pcs.
2 pcs. is mounted on the tabletop
2 pcs. is mounted on the front fascia



Sink 97001342 1 pc.




Angle with coupling 1 pc.




Screw Ø4,8x9,5 torx 95091009: 20 pcs.




5. Mounting instructions

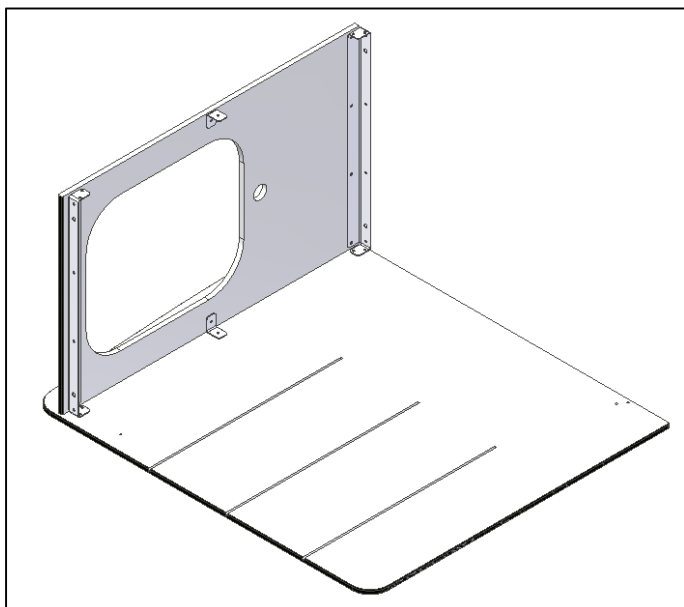


Bordplade skrues på den ene sideplade.

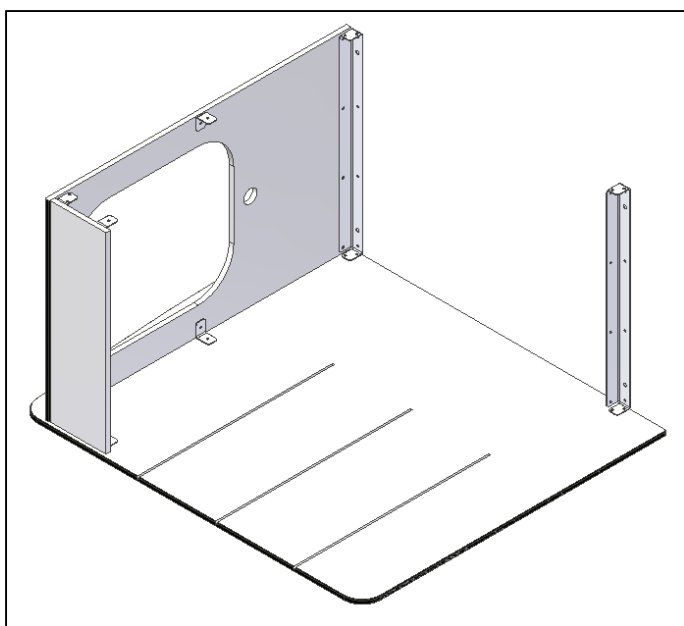


Frontsarg og løst beslag skrues på.

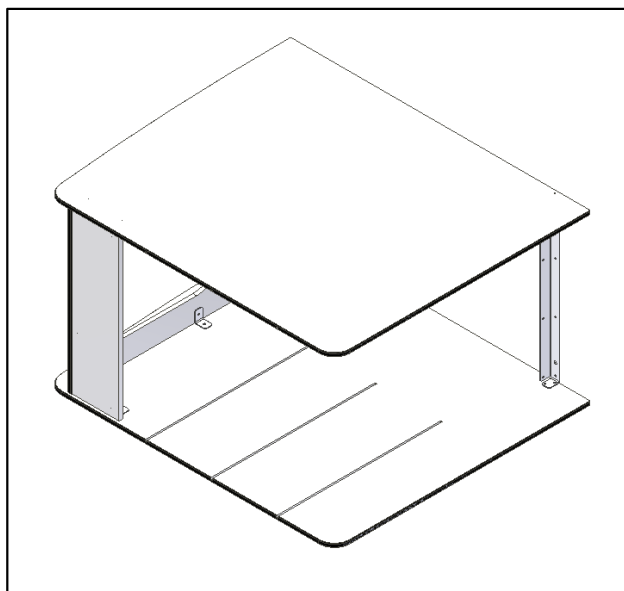

Den modsatte sideplade skrues på.

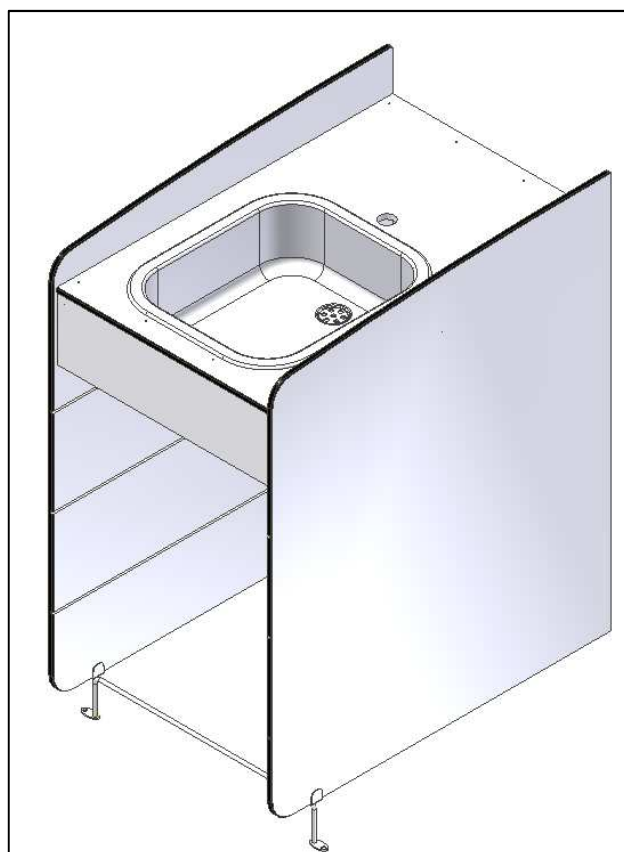

Støttefod, vask og vinkel med omløber monteres.

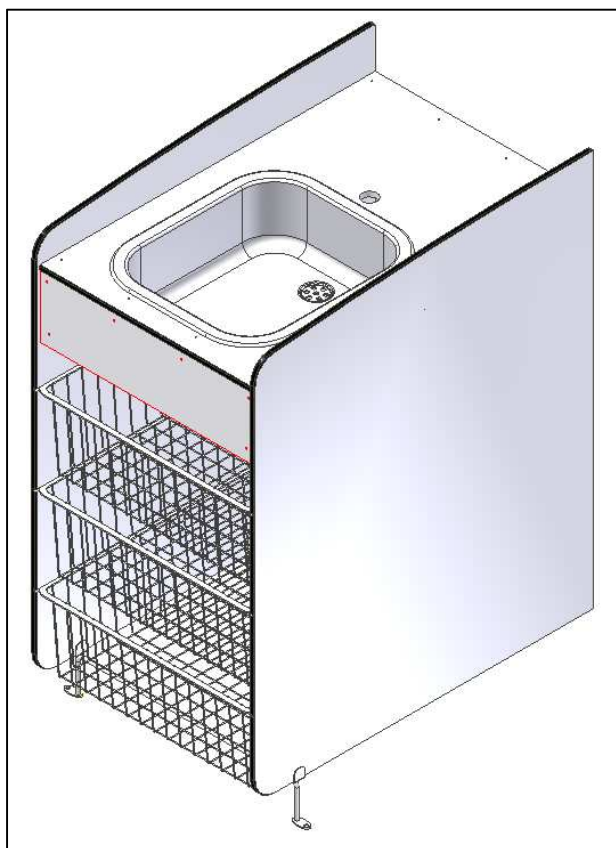

**Kurveenheden skrues fast til væggen og
trådkurvene kan herefter monteres.**

6. Cleaning/ maintenance

Ropox Basket unit are maintenance-free. However, for safety reasons we recommend regular inspection of all assembly bolts to ensure correct and secure fastening.

Cleaning:

Do not use a high-pressure washer to clean this product.

Simply use a soft cloth or sponge with soapy water of max. 60°C (pH 7) or cleaning alcohol.

Important:

Do not use scouring powder or other abrasives, as they will scratch the surfaces.

Also, avoid the use of cleaning utensils with sharp edges. Never use strong mineral acids or alkaline products.

7. CE declaration

Ropox Basket unit with wash basin: 50-50696

Ropox Bsket unit without wash basin: 50-50697

Are in accordance with the following directive and standards:

DIRECTIVES

Council directive 93/42/EEC of 14 June 1993 concerning medical devices

Machinery Directive No. 2006/42/EC, amended by Directive No. 98/37/EC.

STANDARDS

DS/EN ISO 12182: 2012

DS/EN ISO 14971: 2001

Dato: 01.05.15




Tommy Jensen
Adm. direktør

8. Complaint

See General Terms of Sale and Delivery on www.ropox.dk



Ringstedgade 221
DK – 4700 Næstved
Tel.: +45 55 75 05 00 Fax.: +45 55 75 05 50
E-mail: info@ropox.dk
www.ropox.dk

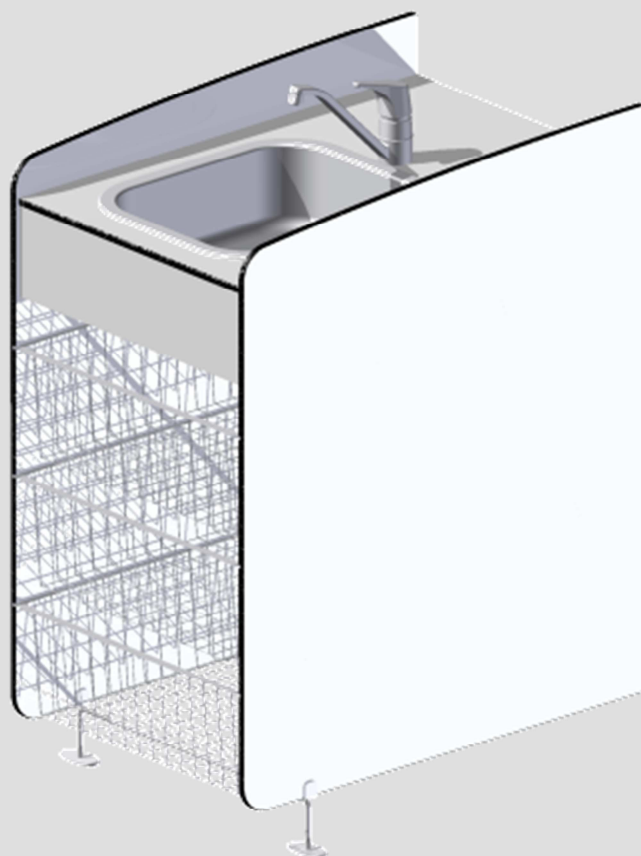

Ropox Korb einheit

Benutzerhandbuch

Montageanleitung



Verbleibt beim Produkt

Inhaltsverzeichnis

1. Technische Daten	27
2. Modelle.....	28
3. Maßskizze	28
4. Komponentenliste	29
5. Montageanleitung	31
6. Reinigung/ Wartung	344
7. CE-Erklärung	355
8. Reklamation.....	366

1. Technische Daten

Produktname:	Ropox Korb Einheit
Warennummer:	50-50696 – Ropox Korb einheit mit Waschbecken 50-50697 – Ropox Korb einheit ohne Waschbecken
Arbeitshöhe:	95 cm
Materialien:	Stahl 37
Tischplatte und Seitenabdeckung:	Kompaktlaminat Weiß 12 mm
Oberflächenbehandlung:	Pulverlackierung
Max. Belastbarkeit des Rahmens (statisch):	30 kg über die Tischplatte gleichmäßig verteilt
Reklamation:	Siehe Reklamation
Hersteller:	Ropox A/S, DK-4700 Næstved, Tel.: +45 55 75 05 00 E-Mail: info@ropox.dk , www.ropox.dk

2. Modelle


Mit Waschbecken



Ohne Waschbecken



3. Maßskizze

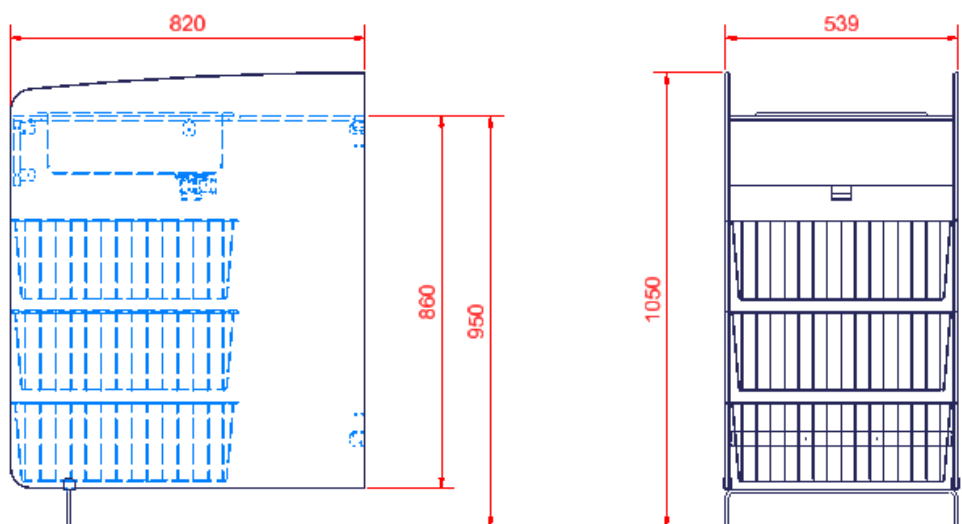

4. Komponentenliste


Seitenabdeckung links 1 Stück

Warennummer: 50*50670-211



Seitenabdeckung rechts 1 Stück

Warennummer: 50*50670-212

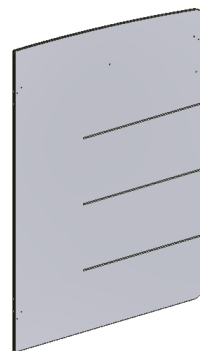

Tischplatte 1 Stück

monteret med beslag


Bordplade med udskæring for vask: 50*50670-213

Bordplade uden udskæring for vask: 50*50670-225



Voderzarge 50*50670-214 1 Stück

Monteret med beslag

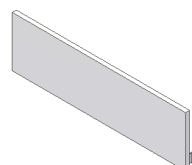

Drahtkörbe 97002007 3 Stück



Beschlag 50*50670-215 3 Stück

2 stk. Er monteret på bordplade



Stützfüße 50-50670-218: 1 Stück



Vinkelbeslag 50*50670-217 4 stk.

2 stk. monteret på bordplade

2 stk. monteret på frontsarg



Vask 97001342 1 stk.




Vinkel med omløber 97001191 1 stk.




Schraube Ø4,8x9,5 95091009 20 Stück




5. Montageanleitung

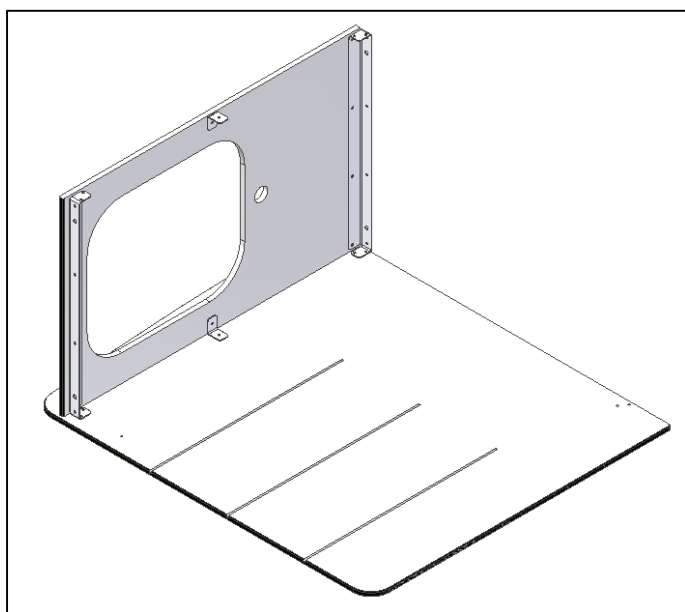


Bordplade skrues på den ene sideplade.

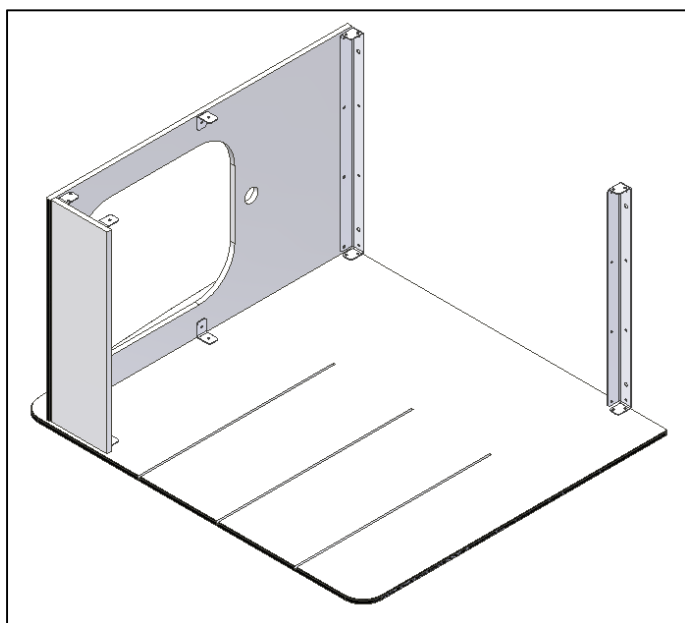


Frontsarg og løst beslag skrues på.

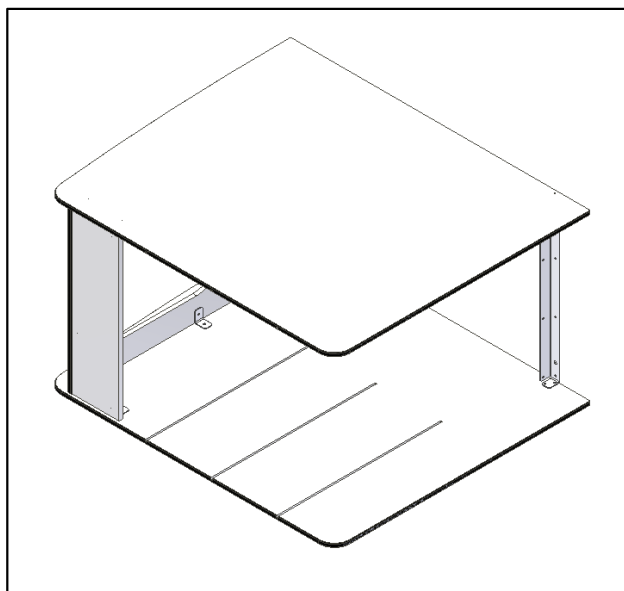

Den modsatte sideplade skrues på.

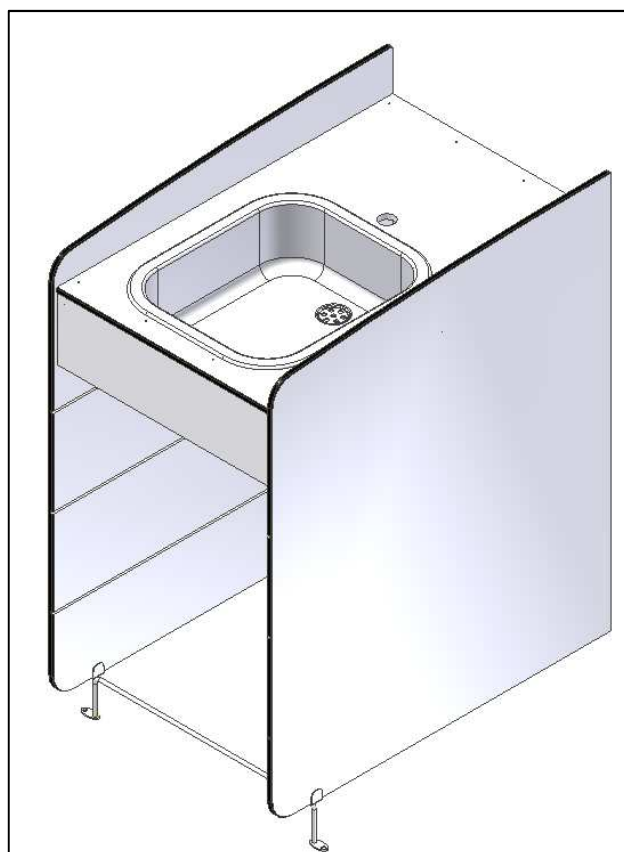

Støttefod, vask og vinkel med omløber monteres.

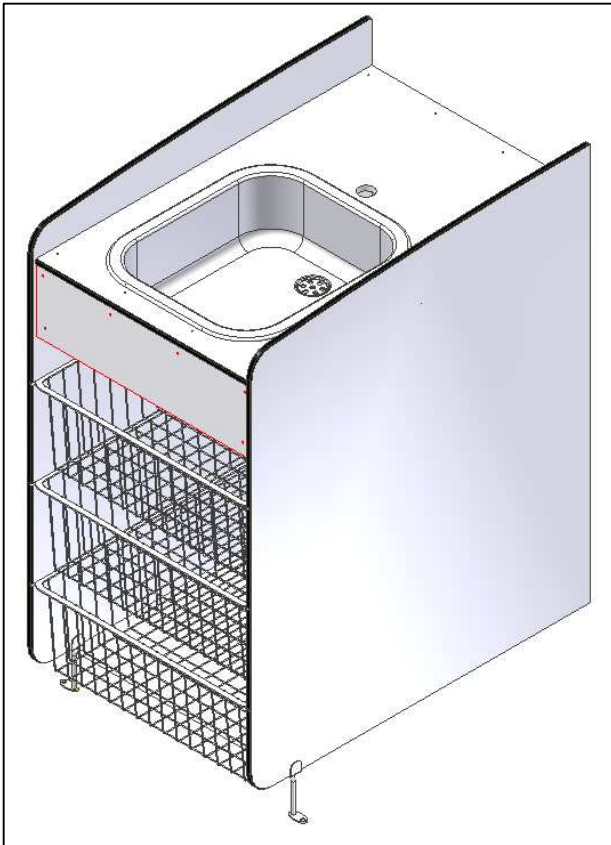

**Kurveenheten skrues fast til væggen og
trådkurvene kan herefter monteres.**

6. Reinigung/ Wartung

Ropox Korb einheit sind wartungsfrei. Aus Sicherheitsgründen empfiehlt sich jedoch eine regelmäßige Überprüfung aller Montagebolzen zur Sicherstellung der korrekten und sicheren Befestigung.

Reinigung

Nie für die Reinigung des Produktes einen Hochdruckreiniger benutzen.
Einfach einen weichen Lappen oder Schwamm mit Seifenwasser von höchstens 60°C (pH 7) oder Haushaltsspiritus verwenden.

Wichtig:

Kein Scheuerpulver oder andere schleifende Produkte verwenden, um Risse in den Oberflächen zu vermeiden. Auch keine spitzen oder scharfen Reinigungswerkzeuge verwenden. Starke Säure oder alkalische Produkte dürfen nicht benutzt werden.

7. CE-Erklärung

Ropox Korb einheit mit Waschbecken: 50-50696
Ropox Korb einheit ohne Waschbecken: 50-50697

entspricht den untenstehenden Richtlinien und Normen:

RICHTLINIEN

Council directive 93/42/EEC of 14 June 1993 concerning medical devices


Maschinenrichtlinie Nr. 2006/42/EG, abgeändert durch Richtlinie Nr. 98/37/EG.

NORMEN

DS/EN ISO 12182: 2012

DS/EN ISO 14971: 2001

Dato: 01.05.15

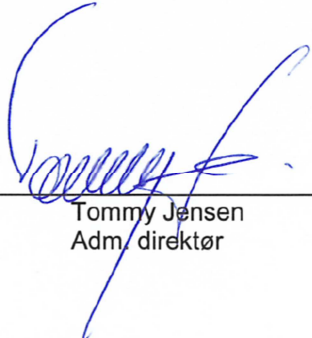

Tommy Jensen
Adm. direktør

8. Reklamation

Siehe Allgemeine Verkaufs- und Lieferungsbedingungen auf www.ropox.dk



Ringstedgade 221
DK – 4700 Næstved
Tel.: +45 55 75 05 00 Fax.: +45 55 75 05 50
E-mail: info@ropox.dk
www.ropox.dk