

”Idealiskt tvättställ när utrymmet är begränsat”



ROPOX QUICKWASH

ETT HÖJDJUSTERBART TVÄTTSTÄLL SOM KAN SKJUTAS UT FRÅN VÄGGEN

QuickWash är ett höjjusterbart tvättställ som går att skjuta ut från väggen. Tvättstället kan sänkas 14 cm från dess fasta punkt och skjutas ut 10 cm från väggen.

Det är en idealisk lösning för rullstolsanvändare eftersom det ger dem ett välbehövligt extrautrymme för benen. När tvättstället skjuts ut och ner får rullstolsanvändare ett benutrymme på 63 cm under tvättstället, så att de kan komma nära handfatet och nå kranen.

Höjden justeras med ett frigöringshandtag som också kan användas som handdukhållare. Det krävs mycket liten ansträngning att sänka och höja tvättstället. Positionslåset säkerställer att tvättstället är ordentligt fastsatt.

QuickWash kräver ingen elektricitet och levereras förmonterat, vilket gör det enkelt att installera. Den kostnadseffektiva lösningen är idealisk för små badrum och den rena, enkla designen passar bra in i privata hem.



ROPOX™


BETTER WAYS TO BETTER DAYS

— A PART OF AddLife®

ROPOX QUICKWASH

Höjdstyring: 14 cm
Förflyttning utåt: 10 cm
Max. användarvikt: Testad enligt DS-ISO 17966:2016
(se max. användarvikt nedan)


VARIANT/MODELL

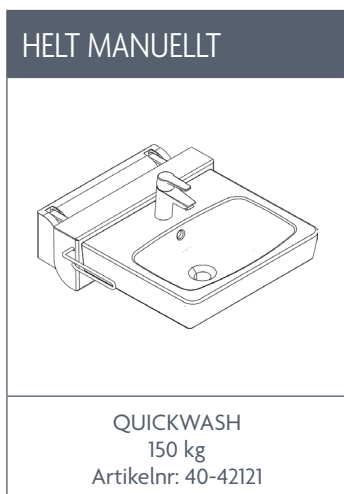

Blandare och vatten- och avloppssats följer med tvättställen.

TILLBEHÖR

Bottenventil med
bräddavlopp
Artikelnr: 40-40935

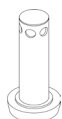

Blandare med hjälphandtag
Artikelnr: 40-44039



Ettgrepps blandare
Artikelnr: 40-44040



Beröringsfri blandare
Artikelnr: 40-44045



OBS! Under den aktuella produkten och i bruksanvisningarna på vår webbplats hittar du mer information om mått, tekniska data, installationsgränssnitt och mycket mer.

Produkterna är tillverkade enligt följande standard: DS/ISO 17966:2016.

ROPOX A/S · Ringstedgade 221 · 4700 Naestved, Denmark – Telefon: +45 5575 0500 · info-se@ropox.se · www.ropox.se

ROPOX™
BETTER WAYS TO BETTER DAYS
– A PART OF AddLife®

No. SE_1962407_0124