ROPOX™
BETTER WAYS TO BETTER DAYS
- A PART OF AddLife



Ropox Bluetooth

FlexiElectric & Oberschränke

Gebrauchsanweisung

30-90591

TF 200.0054_de / Rev 06 / 26-11-2025

Inhaltsverzeichnis

Introduktion 3
Applikation herunterladen 3
Für iOS 3
Kompatible Produkte und Funktionen 3
Nachrüstung 3
Set-up 4
Lichtanzeigen 5
Montage 5
Gebrauchsanweisung 6
Ein Produkt speichern 6
Mit gespeichertem Produkt 7
Höhenverstellung speichern 8
Mit gespeicherter Höheneinstellung 9
Anpassungsmöglichkeiten 10
Produkt oder Einstellung entfernen 10
Bedienungshilfe 11
Schriftgröße anpassen 11
Haptisches Feedback 11
Bildschirmleser 11
Fehlersuche 11
Das richtige Produkt nicht findbar 11
Keine Verbindung zum Produkt 11
Produkt nicht im Betrieb 11
Spracheinstellungen 11

Introduktion

Die Ropox Connect-App ist eine Applikation, mit der Sie Ihre Ropox-Produkte aus der Ferne steuern können. Indem Sie Ihr iOS-Gerät mit einem Produkt mit integriertem Bluetooth-Adapter verbinden, können Sie Ihr Produkt nach oben oder unten verstellen.

Nach Paarung zwischen Ihrem iOS-Gerät und einem Ropox-Produkt mit angeschlossenem Bluetooth-Adapter kann Ihr Produkt aus einer beträchtlichen Entfernung gesteuert werden. In der Praxis ist das oft weit über 10 Meter. Außerdem ermöglicht die Applikation das Speichern von Höheneinstellungen, so dass Sie einfach und schnell zwischen voreingestellten Höhen wechseln können.

Applikation herunterladen

Für iOS


1. QR-Code scannen, oder App Store öffnen.
2. Im App Store auf 'Suche' drücken.
3. Nach 'Ropox Connect' suchen.
4. Ropox Connect-App finden, auf 'Download' drücken

Kompatible Produkte und Funktionen

	Kompatibel	Produkt fahren	Höhenanzeige	Höhenspeicherung
FlexiElectric	✓	✓	✓	✓
Diagonal	✓	✓	✓	✓
VertiElectric	✓	✓	✓	✓
VertiInside	✓	✓	✗	✗

Nachrüstung

In den meisten Fällen kann der Bluetooth-Adapter bei bestehenden Ropox-Produkten nachgerüstet werden. Jedoch beachten, wenn das Ropox-Produkt vor dem **1. Januar 2018** gekauft worden ist, die Möglichkeit besteht das es nicht kompatibel ist. Falls Sie unsicher sind, wann Sie Ihr Produkt erhalten haben, überprüfen Sie die Markierungsbeschreibung auf dem Steuerkasten. Sollte mit „Works with LOGIClink" markiert sein.

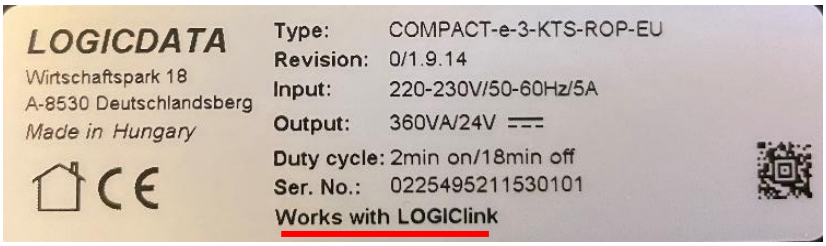

Set-up


Es ist einfach und schnell, ein Ropox-Produkt anzuschließen. Bevor Ihr Ropox-Produkt ferngesteuert werden kann, muss der Bluetooth-Adapter in Ihr Produkt integriert werden. Um dies zu tun, sind die untenstehenden Anweisungen zu befolgen.

Bei der Suche nach Ihrem Produkt in der App denken Sie daran, dass es standardmäßig mit **LogicLink** beginnt. Beachten Sie auch, dass der Bluetooth-Adapter zwei Tasten auf der Vorderseite hat, die zur Steuerung des Produkts verwendet werden können, zusätzlich zu der Taste, die standardmäßig mit Ihrem Ropox-Produkt geliefert wird.

1 Die Platzierung des Adapters entscheiden, dann den Bluetooth-Adapter und das mitgelieferte Schlitzkabel nehmen.




2 Schlitzkabel in den "**HS**"-Anschluss des Steuergeräts stecken. Dann den Adapter in das eine Ende einstecken, und die mitgelieferte Handbedienung in das andere Ende.

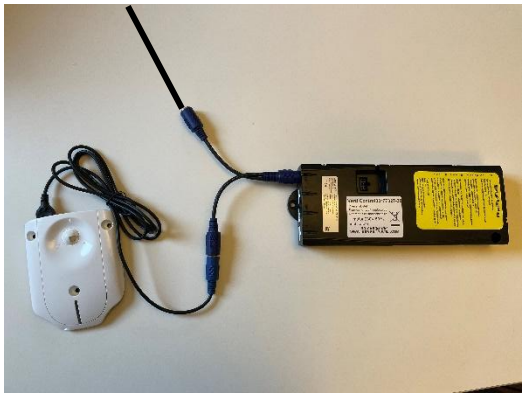

---

3 Wenn der Adapter festmontiert werden muss, tun Sie es jetzt*. Die Montageschablone auf der nächsten Seite ist zu verwenden.

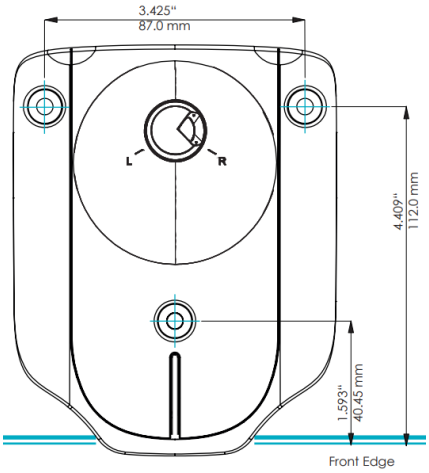

4 Den Adapter in '**Pairing-Modus**' durch zweimaliges schnell Klicken auf die kleine Taste auf der Rückseite versetzen (<0,3s).



Hinweis! Bei mehreren Ropox-Produkten mit Bluetooth-Adaptern empfiehlt es sich, ein nach dem anderen einzusetzen, und dann das Produkt zu speichern.

Lichtanzeigen

Je nachdem, wann Sie Ihren Bluetooth-Adapter erhalten haben, ist auf der Vorderseite des Adapters entweder LEDs oder nicht beschrieben. Dies kann Anhand der Markierung auf der Rückseite des Adapters überprüft werden. Hier steht entweder „LOGIClinkLite“ oder „LOGIClink-Personal-Standard“.

LOGIClinkLite – Keine Lichtanzeigen

LOGIClink-Personal-Standard – Lichtanzeigen


Bei Adaptern mit Leuchtanzeigen, beginnen die LEDs langsam zu blinken, wenn diese in den Pairing-Modus versetzt worden sind. Nachdem Sie Ihr Gerät mit dem Adapter gekoppelt haben, wird das Licht statisch werden und aufhören zu blinken.



Montage

Bei der Montage des Bluetooth-Adapters auf einer schraubenfesten Oberfläche wird empfohlen, den Adapter selbst zur Markierung der Bohrlöcher zu verwenden. Markieren Sie die drei Punkte, bohren Sie sie vor, und befestigen Sie den Adapter mit drei Schrauben (Schrauben einschließlich). Klebestreifen oder doppelseitiges Klebeband lassen sich auch verwenden. Die Maße des Adapters können auf dem folgenden Bild eingesehen werden.

***Notieren Sie den Paarungsschlüssel auf der Rückseite des Adapters bevor Anschrauben!**

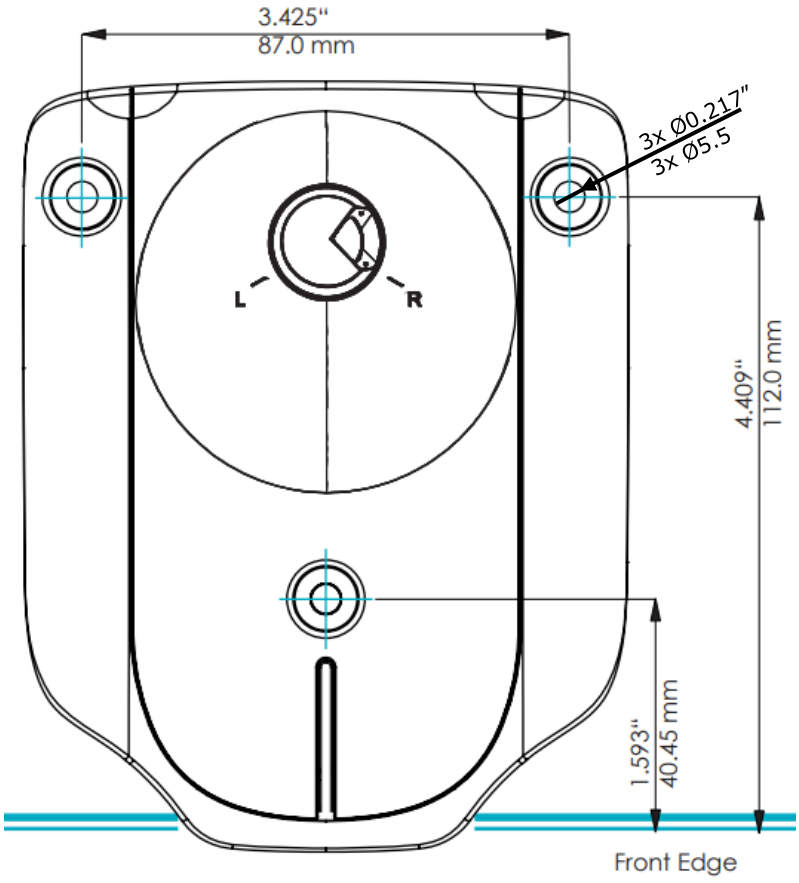

Ein Produkt speichern

1. Die Ropox Connect-App öffnen.


2. Im Hauptmenu auf das rote Plus drücken.



3. Jetzt findet die App alle Bluetooth-Geräte in der Nähe. Wählen Sie das Produkt aus, das Sie speichern möchten.



4. Das Produkt benennen und auf 'Speichern' drücken. Das Produkt ist jetzt gespeichert.

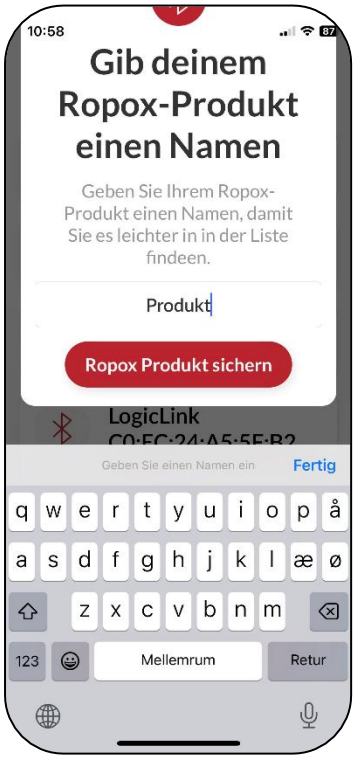


Hinweis! Beim ersten Verbinden mit einem Produkt benötigt der Bluetooth-Adapter einen Paarungs-Schlüssel, der auf der Rückseite des Adapters zu sehen ist. Normalerweise lautet er: 000000



Mit gespeichertem Produkt


1. Im Hauptmenü auf ein gespeichertes Produkt drücken.

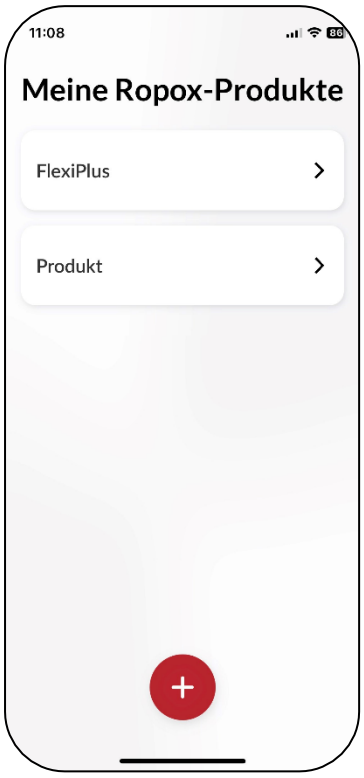

2. Beim ersten Verwenden des Produkts ist die Sockelhöhe zu messen und einzugeben. Dies ist optional, aber wird empfohlen.




3. Ob die Sockelhöhe eingegeben ist oder nicht, kann das Produktet jetzt mit der ▲/▼ -Taste nach oben oder nach unten gesteuert werden.

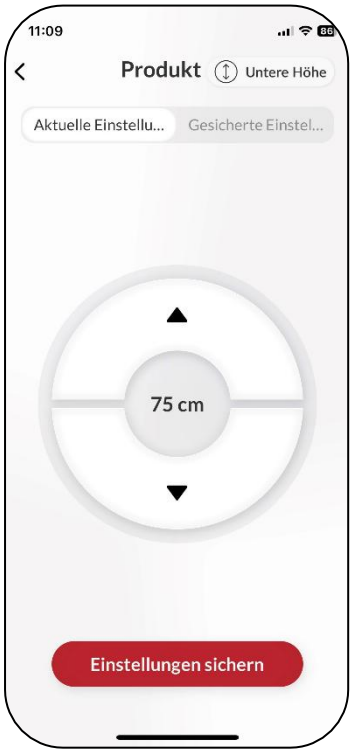


Hinweis! Bei Verwendung von Ropox Connect für bestimmte Ropox-Produkte, einschl. VertiInside, werden Höhenanzeige und gespeicherte Einstellungen deaktiviert.

Es sieht wie folgt aus:

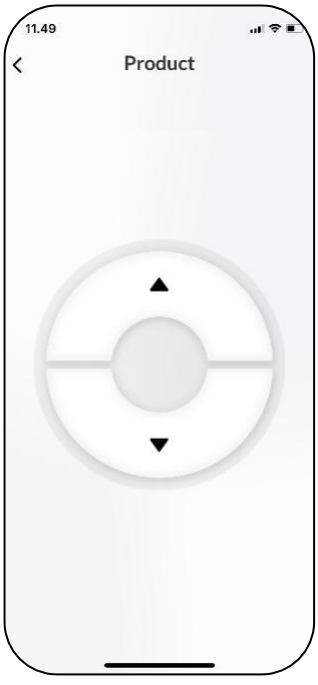


Höhenverstellung speichern

1. Im Hauptmenü auf ein gespeichertes Produkt drücken.

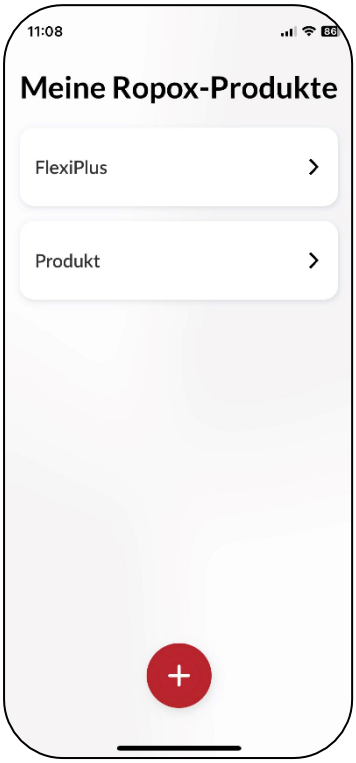

2. Das Produkt auf die gewünschte Höhe bringen.

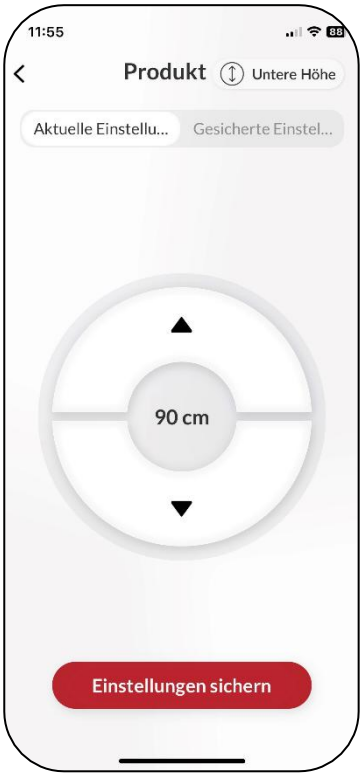


3. Auf 'Einstellung speichern' drücken. Höhenverstellung benennen und erneut auf 'Speichern' drücken.



Mit gespeicherter Höheneinstellung


1. In der Registerkarte 'Gespeicherte Einstellungen', werden die gespeicherte Einstellungen gezeigt. Auf eine Einstellung drücken.

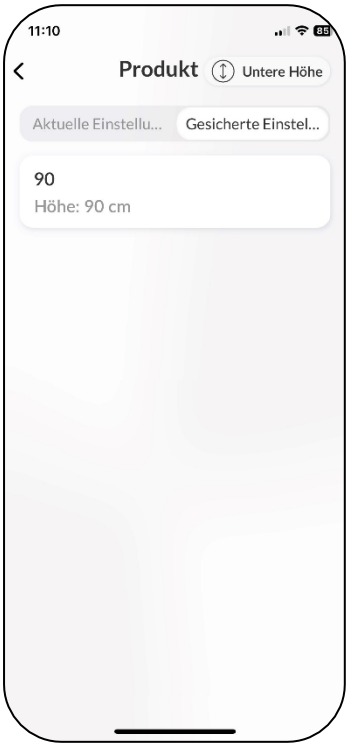

2. Eine Drucktaste wird angezeigt. Die Taste gedrückt halten, bis das Produkt die gespeicherte Einstellung erreicht hat.




3. Das Produkt stoppt, wenn seine gespeicherte Einstellung erreicht ist.

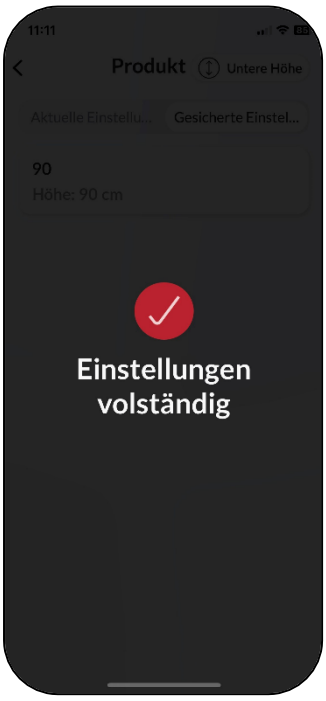


Anpassungsmöglichkeiten


Produkt oder Einstellung entfernen

1. Um ein Produkt oder Einstellung zu entfernen, auf die Einstellung drücken, diese gedrückt halten und nach links ziehen.

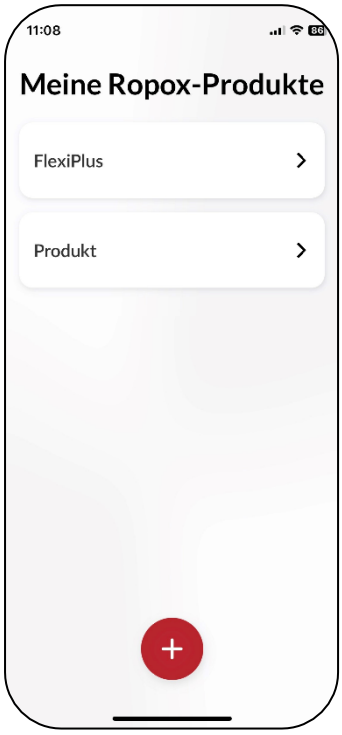

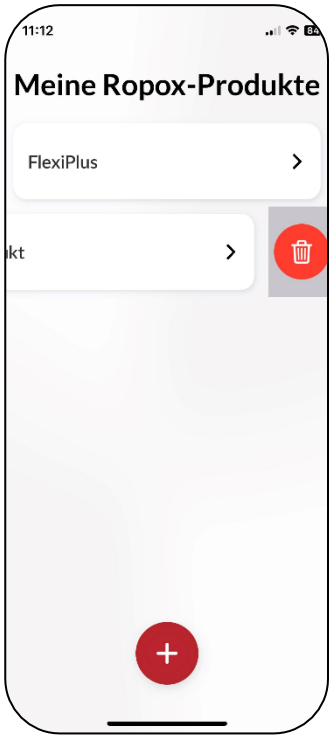

2. Auf das rote Symbol drücken, dann auf 'Löschen', um das Produkt oder die Einstellung zu entfernen.

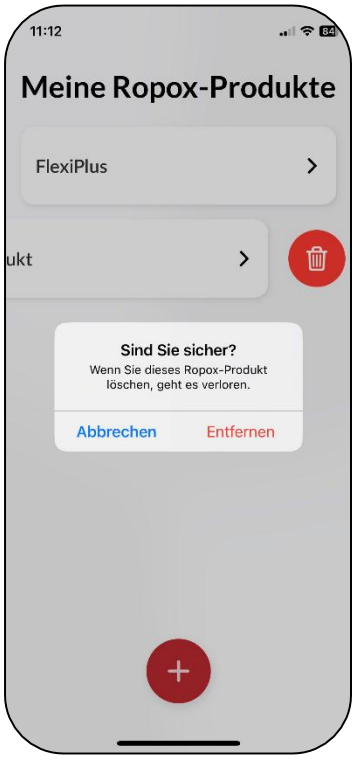

Bedienungshilfe

Schriftgröße anpassen

1. Die Schriftgröße lässt sich in den Geräteeinstellungen anpassen.

2. Zu 'Einstellungen' gehen, nach unten scrollen, zu 'Anzeige und Helligkeit' gehen.

3. Nach unten scrollen und zu 'Textgröße' gehen.

4. Den unteren Schieberegler verschieben, um die gewünschte Textgröße einzustellen.

Haptisches Feedback

Die Ropox Connect-App hat standardmäßig eine Funktion, bei der sie beim Antrieb von Ropox-Produkten zu vibrieren beginnt. Dies lässt sich über die Einstellungen des Geräts deaktivieren oder aktivieren.

Bildschirmleser

Die Ropox Connect-App ist mit dem Bildschirmleser kompatibel, der in den Geräteeinstellungen aktiviert werden kann.

1. Zur 'Einstellungen' des Geräts gehen und nach unten zu 'Bedienungshilfen' scrollen.

2. Unter 'Bedienungshilfen' auf 'VoiceOver' drücken.

3. Auf die obere Taste in 'VoiceOver' drücken.

Hinweis! Das Anpassen der Bedienungshilfen ändert die Einstellungen im gesamten Gerät, nicht nur in der App!

Fehlersuche

Das richtige Produkt nicht findbar

1. In der Übersicht über Bluetooth-Einheiten nach Einheiten suchen, die mit **LogicLink** beginnen.

2. Wenn keine **LogicLink-**Einheit angezeigt wird, ist der Bluetooth-Adapter wieder in Pairings-Modus zu versetzen. Dies erfolgt durch zweimaliges schnell Drücken auf die kleine Taste auf der Rückseite des Adapters (<0,3s).

3. Das Produkt muss **zurückgesetzt** werden. Dieses Verfahren ist in der mit dem Ropox-Produkt gelieferten Bedienungsanweisung beschrieben. Dazu ist die mit dem Produkt gelieferte **Steuerungstaste** zu verwenden. Zum Zurücksetzen muss das Produkt ganz nach unten oder ganz nach oben fahren, und dann muss die Taste für einige Sekunden gedrückt werden.

Keine Verbindung zum Produkt

1. Mit einem schnellen Doppelklick auf den Paarungs-Knopf versuchen, dann wieder verbinden.

Produkt nicht im Betrieb

Wenn die App das Produkt findet, aber es nicht funktioniert, kann es daran liegen, dass der Bluetooth-Adapter die Verbindung zum Produkt verloren hat. Dies kann passieren, wenn eine Zurücksetzung über die App durchgeführt wird.

1. Das Adapterkabel aus dem Schlitzkabel ziehen und es wieder anschließen.

2. Versuchen, ob das Produkt wieder funktioniert.

Spracheinstellungen

Die Ropox Connect-App unterstützt mehrere Sprachen. Die Liste der unterstützten Sprachen ist unten angeführt:

- Dänisch (Danmark)
- Englisch (GB/US)
- Norwegisch (Norge)
- Finnisch (Suomi)
- Deutsch (Deutschland)
- Niederländisch (Nederland)
- Spanisch (España)
- Italienisch (Italia)
- Französisch (France)