ROPOX™
BETTER WAYS TO BETTER DAYS
- A PART OF AddLife



Ropox Bluetooth

FlexiElectric & Overskabe

Brugermanual

30-90591

TF 200.0054_dk / Rev 06 / 26-11-2025

Indhold

Introduktion 3
Sådan hentes applikationen 3
Til iOS 3
Kompatible produkter og funktioner 3
Retrofitting 3
Opsætning 4
Lysindikationer 5
Montering 5
Brugsanvisning 6
At gemme et produkt 6
Kør med et gemt produkt 7
Gem en højdeindstilling 8
Kør med en gemt højdeindstilling 9
Indstillingsmuligheder 10
Fjern et produkt eller indstilling 10
Tilgængelighedsfunktioner 11
Juster skriftstørrelsen 11
Haptisk feedback 11
Skærmoplæser 11
Fejlfinding 11
Kan ikke finde det rigtige produkt 11
Kan ikke forbinde til produktet 11
Produktet kører ikke 11
Sprogindstillinger 11

Introduktion

Ropox Connect App er en applikation som gør dig i stand til at fjernstyre dine Ropox produkter. Ved at forbinde din iOS enhed og et produkt med en isat Bluetooth adapter, opnår du muligheden for at justere dit produkt i opad- eller nedadgående retning.

Efter parring er opnået mellem din iOS enhed og et produkt med en isat Bluetooth adapter, kan produktet styres på en betydelig afstand. I praksis er det ofte langt over 10 meter. Derudover giver applikationen dig mulighed for at gemme højdeindstillinger, så du nemt og hurtigt kan skifte mellem forudindstillede højder.

Sådan hentes applikationen

Til iOS


1. Scan QR-koden, eller åbn appen App Store.
2. Inde i App Store, tryk på søg.
3. Søg efter "Ropox Connect".
4. Find Ropox Connect appen, og tryk på hent.

Kompatible produkter og funktioner

	Kompatibel	Køre produkt	Vise højden	Gemme højden
FlexiElectric	✓	✓	✓	✓
Diagonal	✓	✓	✓	✓
VertiElectric	✓	✓	✓	✓
VertiInside	✓	✓	×	×

Retrofitting

Bluetooth adapteren kan i de fleste tilfælde retrofittes på eksisterende Ropox produkter, dog er det værd at bemærke, at har du modtaget dit Ropox produkt før **1. januar 2018**, er der sandsynlighed for, at den ikke er kompatibel. Er du i tvivl om hvornår du modtog dit produkt, tjek i stedet beskrivelsen på mærkningen på kontrolboksen, denne skal sige "Works with LOGIClink".

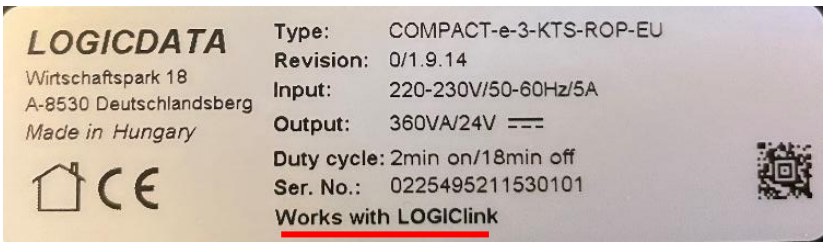

Opsætning


At forbinde til et Ropox produkt er simpelt og hurtigt. Førend dit Ropox produkt kan begynde at blive fjernstyret, skal Bluetooth adapteren isættes produktet. For at isætte Bluetooth adapter i dit Ropox produkt, følg instrukserne herunder.

Når du skal finde produktet i appen, vil det som udgangspunkt altid starte med **LogicLink**. Bemærk, Bluetooth adapteren har to knapper forest, som kan bruges til at styre produk tet med, ud over den knap der som standard vil følge med dit Ropox produkt.

1 Beslut hvor adapteren skal placeres, og tag derefter Bluetooth adapteren og det medfølgende splitkabel




2 Indsæt splitkablet i porten "**HS**" i kontrolboksen. Sæt herefter adapteren i den ene ende, og den håndbetjening der fulgte med produktet, i den anden

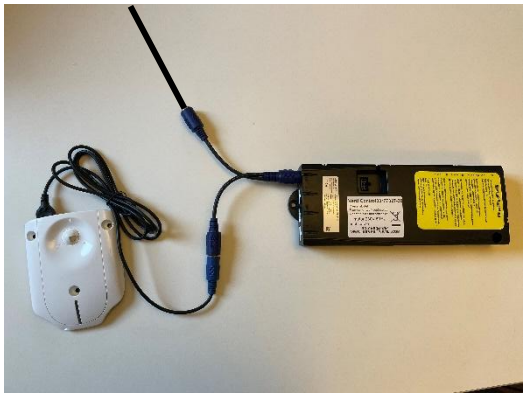

---

3 Hvis adapteren skal fastmonteres, gøres det nu*. Benyt montage-skabelon på næste side

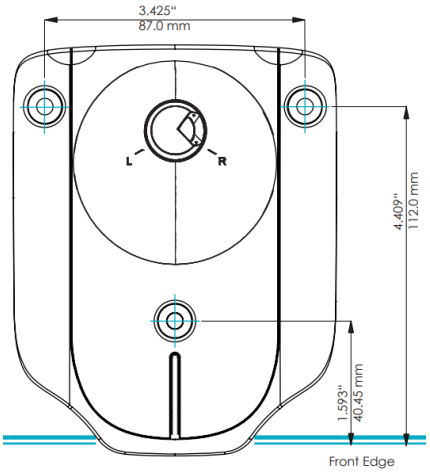

4 Sæt adapteren i "**Parrings-mode**". Dette gøres ved at klikke to gange hurtigt på den lille knap bagerst (<0,3s)



Bemærk! Det anbefales ved flere Ropox produkter med Bluetooth adaptere at indsætte disse én ad gangen, og gemme produktet

Lysindikationer

Afhængigt af hvornår du har modtaget din Bluetooth adapter, vil der enten være LED'er, eller ikke, forrest på adapteren. Dette kan man kontrollere ved at tjekke mærkningen bag på adapteren. Denne vil enten sige "LOGIClinkLite" eller "LOGIClink-Personal-Standard".

LOGIClinkLite – Ingen lysindikationer

LOGIClink-Personal-Standard – Lysindikationer


På adapteren med lysindikationer, hvis du sætter den i parrings-mode, vil LED'erne begynde at blinke langsomt. Efter du har parret din enhed til adapteren, vil lyset blive statisk, og stoppe med at blinke.



Montering

Til montage af Bluetooth adapteren på en skruefast flade, anbefales det at bruge selve adapteren til at markere huller op med, når der skal bores. Markér de tre punkter, for-bor dem, og skru adapteren fast med 3 skruer (skruer inklusiv). Der kan ligeledes benyttes strips eller dobbeltklæbende tape. Mål på adapteren kan ses på følgende billede.

***Notér parringsnøglen bag på adapteren inden den skrues fast!**

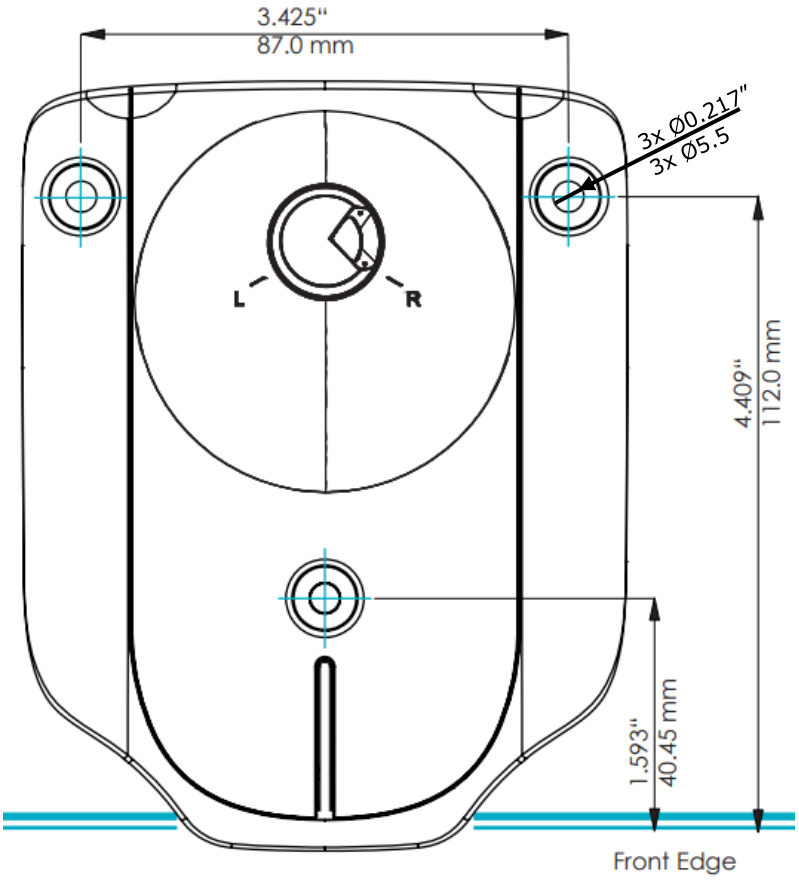

At gemme et produkt

1. Åbn appen Ropox Connect.

2. Fra hovedmenuen, tryk på det røde plus.



3. Nu finder appen alle Bluetooth enheder i nærheden. Vælg det produkt du gerne vil gemme.



4. Navngiv produktet, og tryk gem. Nu er produktet gemt.




Bemærk! Første gang der forbindes til et produkt, vil Bluetooth adapteren bede om en parringsnøgle. Denne ses bag på adapteren. Normalvis er denne nøgle: 000000



Kør med et gemt produkt


1. Fra hovedmenuen, tryk ind på et gemt produkt.

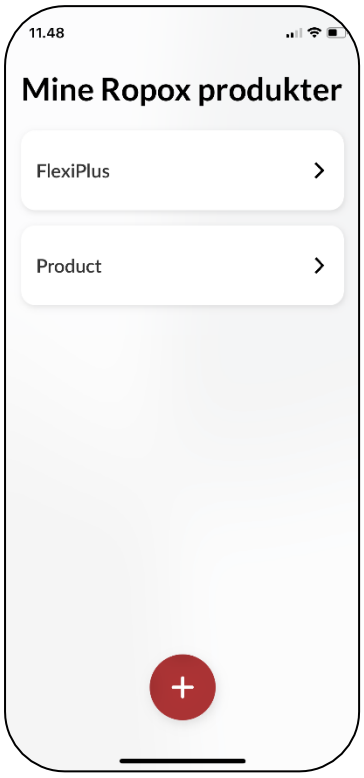

2. Første gang et produkt køres med, skal man måle og indtaste bundhøjden. Dette er valgfrit, men anbefales.




3. Uanset om bundhøjden er sat eller ej, kan produktet nu styres med ▲/▼ knappen opad eller nedad.

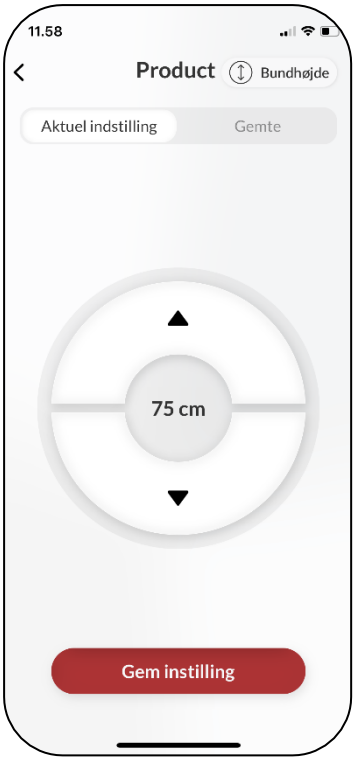


Bemærk! Ved brug af Ropox Connect til visse Ropox produkter, heriblandt VertiInside, vil visning af højde og gemte indstillinger være slået fra.

Visning vil se ud som vist:

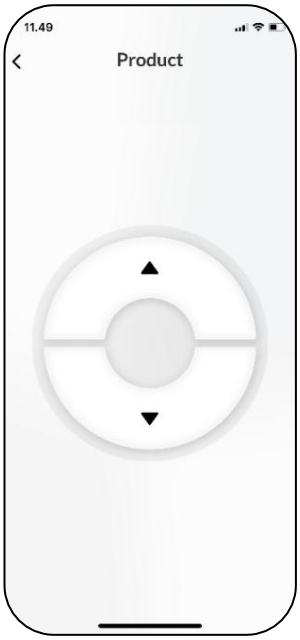


Gem en højdeindstilling

1. Fra hovedmenuen, tryk ind på et gemt produkt.

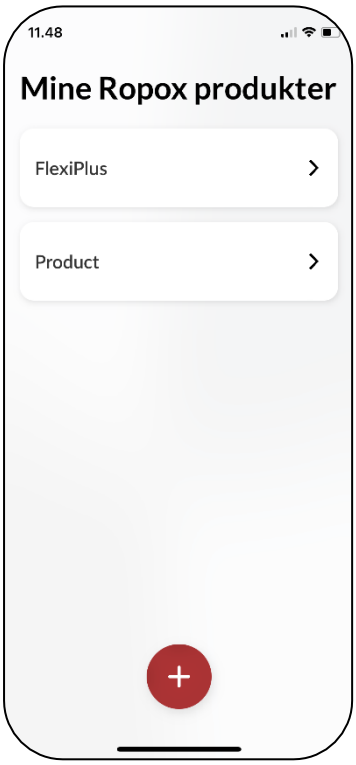

2. Kør produktet til den ønskede højde.

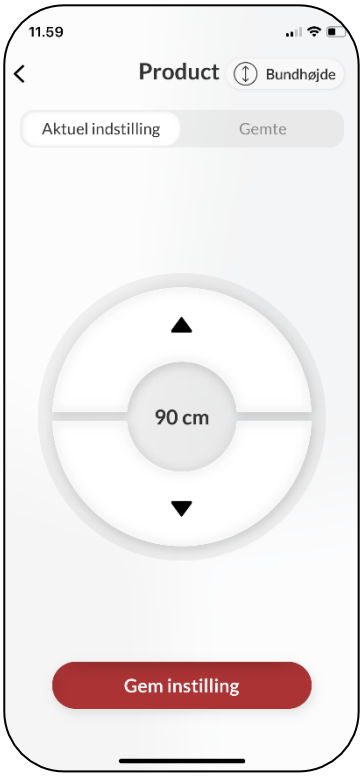


3. Tryk på gem indstilling. Navngiv herfra højdeindstillingen, og tryk gem igen.



Kør med en gemt højdeindstilling

1. Fra fanen 'Gemte', vises de gemte indstillinger. Tryk ind på en indstilling.

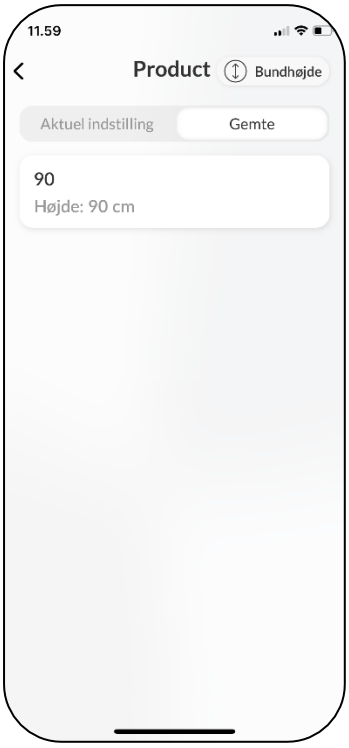

2. Nu vises en trykknap. Hold knappen nede, indtil produktet har nået den gemte indstilling.




3. Når produktet har nået den gemte indstilling, stopper det med at køre.




Indstillingsmuligheder


Fjern et produkt eller indstilling

1. Tryk, hold og træk indstillingen til venstre for at fjerne et produkt eller en indstilling.

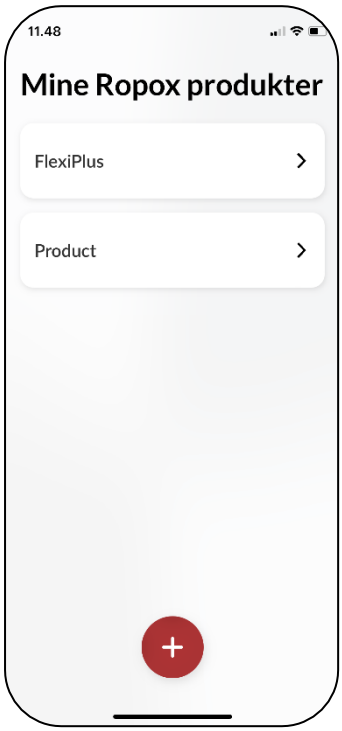

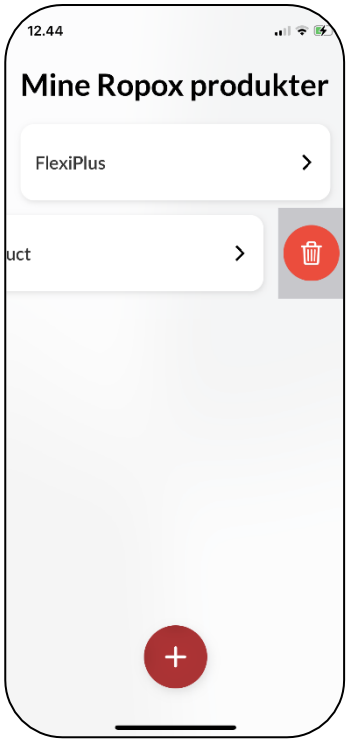

2. Tryk på det røde ikon, og tryk derefter på slet, for at fjerne produktet eller indstillingen.

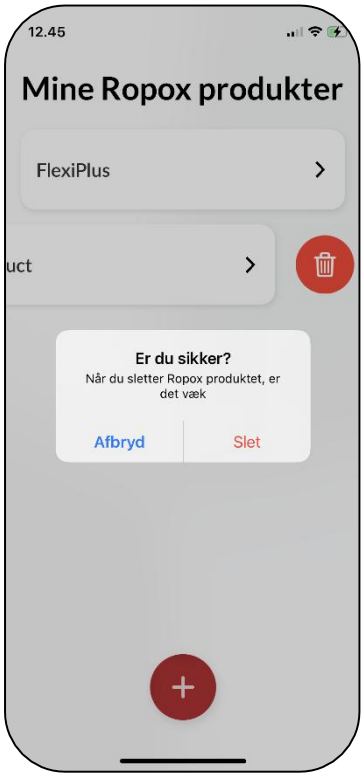

Tilgængelighedsfunktioner

Juster skriftstørrelsen

1. At justere skriftstørrelsen kan gøres fra enhedens indstillinger.

2. Fra indstillinger, rul ned, og gå ind på 'Skærm og lysstyrke'.

3. Rul ned, og gå ind på 'Tekststørrelse'.

4. Juster nu, med slideren nederst, tekst-størrelsen efter behov.

Haptisk feedback

Ropox Connect appen har som standard en funktion, hvor den under kørsel af Ropox produkter begynder at vibrere. Dette kan slås fra eller til inde fra enhedens indstillinger.

Skærmoplæser

Ropox Connect App er kompatibel med skærmoplæser, som kan slås til inde fra enhedens indstillinger.

1. Åbn enhedens indstillinger, og rul ned til 'Tilgængelighed'.

2. Fra 'Tilgængelighed', tryk på 'VoiceOver'.

3. Øverst i 'VoiceOver', tryk på VoiceOver.

Bemærk! At justere enhedens tilgængelighedsfunktioner ændrer disse indstillinger i hele enheden, ikke kun appen!

Fejlfinding

Kan ikke finde det rigtige produkt

1. I oversigten over Bluetooth enheder, se efter enheder der starter med **LogicLink**.

2. Hvis der ikke fremstår nogle enheder kaldet **LogicLink**, skal Bluetooth adapteren sættes i parrings-mode igen. Dette gøres ved at trykke to gange hurtigt på den lille knap bagerst på adapteren (<0,3s).

3. Produktet skal have et **reset**. Se efter denne procedure i den brugsanvisning, som fulgte med Ropox produktet. Til dette anvendes den **betjeningsknap**, som fulgte med produktet.
En reset-procedure indebærer at køre produktet helt i bund eller top, og derefter holde knappen nede i nogle sekunder.

Kan ikke forbinde til produktet

1. Forsøg at dobbeltklikke hurtigt på parringsknappen, og herefter forbind igen.

Produktet kører ikke

Hvis appen godt kan finde produktet, men det ikke vil køre, kan det skyldes at Bluetooth adapteren har mistet forbindelse til produktet. Dette kan ske, hvis et reset foretages med appen.

1. Træk adapterkablet ud af splitkablet, herefter forbind det igen.

2. Forsøg at køre med produktet igen.

Sprogindstillinger

Ropox Connect appen understøtter adskillige sprog. Listen af understøttede sprog findes herunder:

- Dansk (Danmark)
- Engelsk (GB/US)
- Norsk (Norge)
- Finsk (Suomi)
- Tysk (Deutschland)
- Hollandsk (Nederland)
- Spansk (España)
- Italiensk (Italia)
- Fransk (France)